



NISSIN

総合カタログ Vol.1

Dental Simulation Education

ごあいさつ

私たちは「日進歯材研究所」として1948年に創業し、58年から歯科実習用顎模型の製造を手がけ、今日まで多くの方々からの信頼を得てご支援をいただいております。

義歯材料ではたくさんのニッシンファンに支えられ、

また歯科模型では全国の歯科大学・歯学部のみならず遠く海外の歯科教育機関からも

NISSIN歯科模型への熱い想いを頂戴しております。

今後私たちは頂いてきた信頼に甘えることなく、みなさんの声に耳を傾けて

これからも歯科の世界に貢献できる良質の製品と、それをより良く使っていただける情報を届けてまいります。

株式会社ニッシン

代表取締役 横江浩司
社員一同



豊富なノウハウ



高いクオリティ



高い信頼



Category of NISSIN Products

シミュレーター

実習模型


コミュニケーション
模型

歯科材料


※このカタログではシミュレーター・実習模型を紹介しています。
コミュニケーション模型・歯科材料は総合カタログVol.2をご覧ください。

"Experience without learning is better than learning without experience."

歯科医療に従事する人にとって、学問 (Learning) と経験 (Experience) は、
どちらも欠かすことの出来ない重要な要素です。
そして学問が無尽大であるように経験も制限されるべきではありません。
各種アイテムの組合せで広がる無限大の可能性をご提供します。

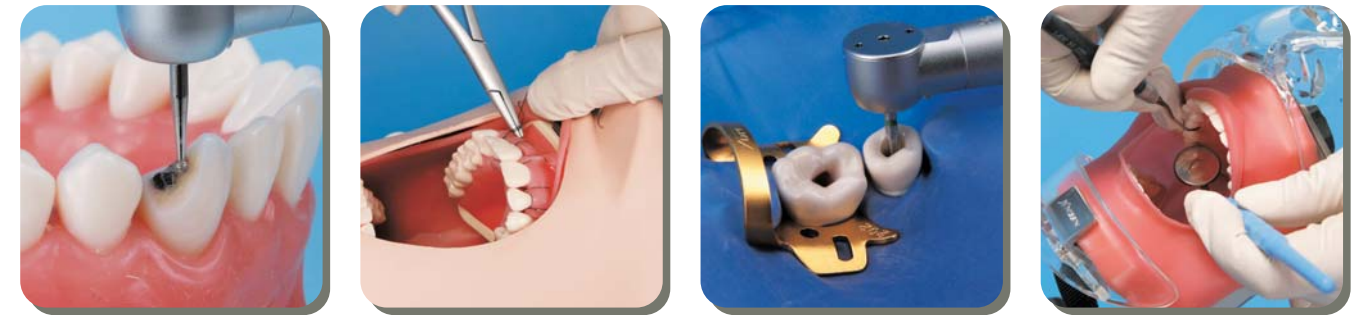

トレーニングに必要な「環境」と「道具」そして「機能」
これらの組合せで広がる無限大の可能性
さらに多様化するトレーニングにも柔軟に対応

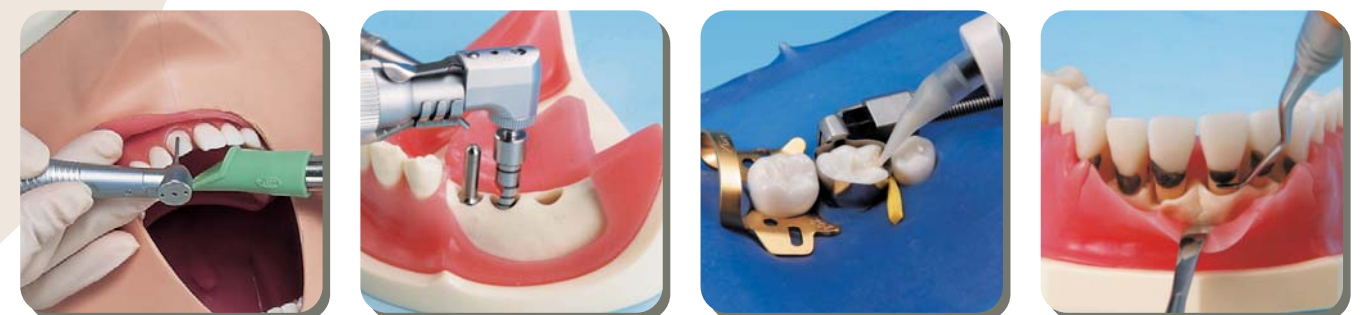

INDEX

デンタル
シミュレーター

実習模型

NISSIM Type.2	12
NISSIM Type.1	14
シンプルマネキン	16

補綴分野

クラウン・ブリッジ補綴領域	20
部分床義歯補綴領域	26
インプラント領域	30
無歯顎補綴領域	34
顎口腔機能領域	38

保存分野

保存修復領域	40
歯内療法領域	46

歯周、SRP分野

SRP領域	52
歯周外科領域	64
ブラークコントロール領域	68

口腔外科、矯正、放射線、理工学分野

口腔外科領域	72
矯正領域	74
放射線領域	77
理工学実習領域	78

小児歯科分野

	80
--	----

歯の解剖学分野

	88
--	----

■使用環境による咬合器の選択

実習を行う際、主にどのような環境の下で使用されるかによって、ご購入時に顎模型に装着される咬合器を選択して頂く必要があります。このカタログでは、様々な環境下の使用に適したFE咬合器を装着したモデルを基本的に紹介しています。



主にマネキン系での実習に

シンプルマネキンなどマネキン系を用いる場合、シミュレーターには咬合機能を備えていないため、予め顎模型にFE咬合器が装着されたモデルを選択してください。

- ・ニッシムType.1
- ・シンプルマネキンⅡ

※装着できる顎模型の詳細はP14～P17をご参照ください。



主にファントム系での実習に

ニッシムType.2などのファントム系を用いる場合、シミュレーター側に咬合機能を備えているため顎模型には咬合器を装着していないモデルを選択してください。

- ・ニッシムType.2

※装着できる顎模型の詳細はP12をご参照ください。



主に机上での実習に

机上での実習には咬合器が装着されたモデルを選択してください。開口状態での顎位の固定が必要な場合はFE咬合器つきモデルを、その機能が不必要な場合はD咬合器を装着したモデルを選択してください。

- ・開口固定機能あり
- ・開口固定機能なし

咬合器なし

咬合器が装着されていないタイプです。

FE咬合器

模型後面に装着して使用する各種機能運動が可能なアルコン型咬合器です。
机上で開口状態を固定することができます。

D咬合器

模型後面に装着して使用する各種機能運動が可能なコンダイラー型咬合器です。
FE咬合器より大きく開口する事ができます。

■カタログの表記について

●模型バリエーション

D18FE-500A-QF

補綴修復用顎模型 [D18FE-500A-QF] ¥29,060

ソフトタイプ粘膜を装着し、シリコン印象材を用いた精密印象採得が可能な顎模型。支台歯形成や窩洞形成、印象採得から装物を装着までの総合的な実習が可能です。

バリエーション／標準価格	
●D18FE-500A-QF (D咬合器つき)	¥27,000
●D18-500A-QF (咬合器なし)	¥22,140

構成部品	
●単歯	●歯
●永久歯	A5A-500
●口部	●口部
●口部	●口部

模型歯交換可	模型歯固定	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成	窩洞形成	個人・咬合トレー製作	歯肉圧排	シリコン印象	最終補綴物製作・装着
-------	------	------------	------	--------	------------

①商品の仕様一覧

ハードタイプモデルやソフトタイプモデルなど商品の仕様が分かるよう一覧形式で表示しています。

- ◇模型歯の交換 可能／不可能
- ◇粘膜のタイプ ソフト／ハード
- ◇マグネットプレート 装着／非装着
- ◇模型歯の固定方法 ネジ止／ワックス止
- ◇マネキン装着 可能／不可能
- ◇その他

②対応実習


◇実習可能な場合

◇実習に適さない場合



■特注品（カスタムモデル）について

このカタログで特注品と表示されているものは、特注にて賜りますカスタムモデルとなります。特注品のため表示されている価格は目安ですが、価格や特注可能な仕様など、お気軽に下記までご相談ください。
また、カタログに記載されているモデル以外やカタログでは特注品扱いとなっていないモデルも、お客さまのご要望に応じてカスタムモデル化が可能です。

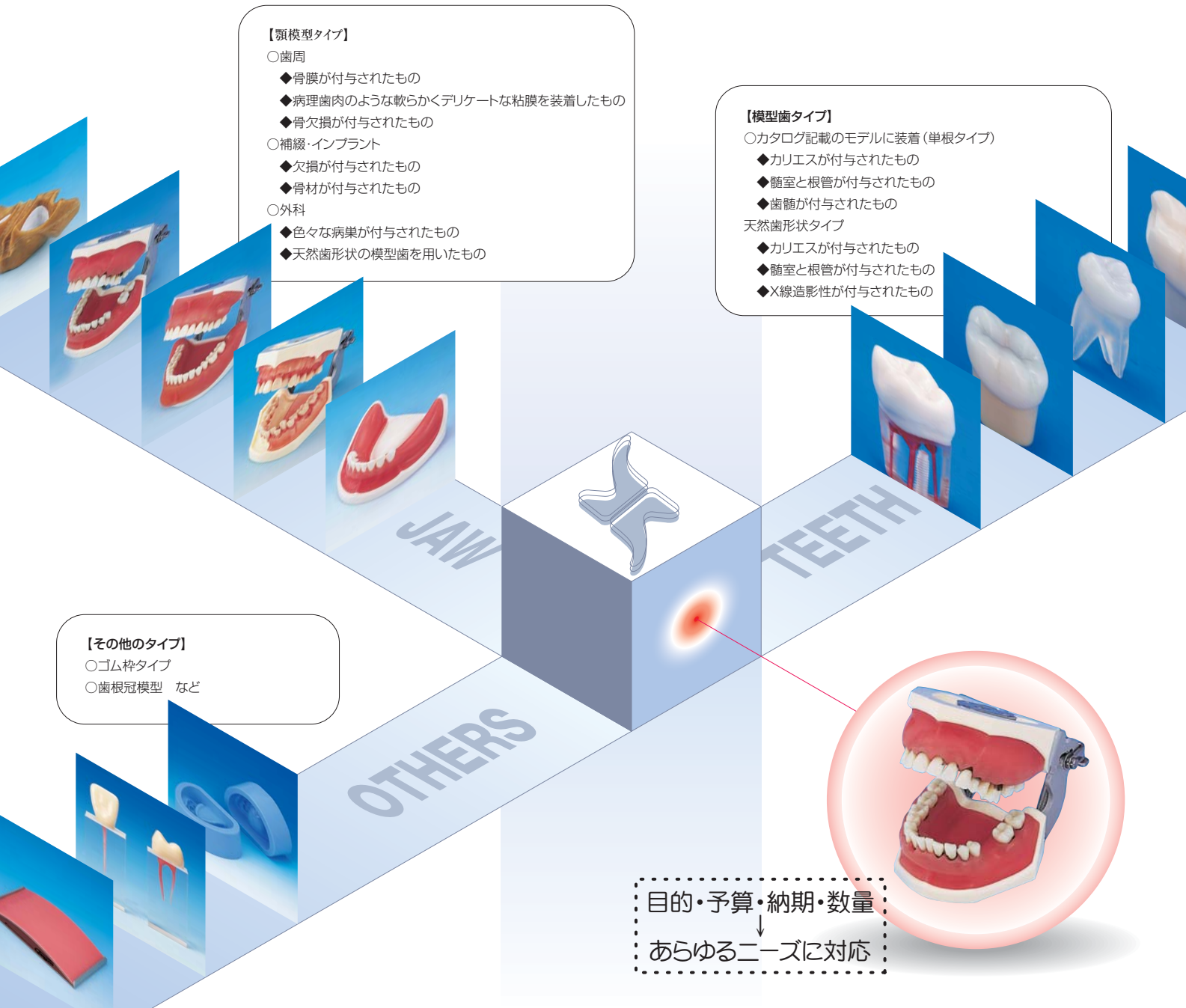

デンタルシミュレーター
Dental Simulators



NISSIM Type.2

P12



NISSIM Type.1

P14



シンプルマネキン II

P16

注文の流れ

ヒアリング

お客様の実習用途や目的・
ご予算をお聞かせ頂きます。

試作

ご要望とご予算に応じて、
仕様を検討後、試作品を
製作致します。

試作品ご確認

完成した試作品と見積書
をご確認して頂きます。

生産

ご了承後、生産を開始致し
ます。

納品

○メールによるお問い合わせ

e-mail : info@nissin-dental.co.jp

○お電話によるお問い合わせ


0120-571939
(平日 10:00～17:00)

西日本営業所／〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町8 TEL075-681-5719
東日本営業所／〒110-0005 東京都台東区上野3-13-8 TEL03-3836-3691

あらゆる実習をより実践的に、 [環境]と[目的]に応じて選べるデンタルシミュレーター。


患者さんにも術者にもストレスを感じにくい診療のため、患者さんの位置関係や術者の姿勢、レストの取り方などの基本姿勢は正確にコントロールされたテクニックを施す上で欠かせない基礎的なテクニックです。
デンタルシミュレーターは、正確にコントロールされたテクニックを修得できるよう、保存処

置や補綴処置などの様々な分野の実習において、実際の場面を想定したより実践的な状況でのシミュレーションを可能にします。デンタルシミュレーターと豊富なバリエーションを持つ顎模型を組み合わせることにより、安全、確実、迅速を目的とした処置のトレーニングをより実践的に効果的に行うことができます。

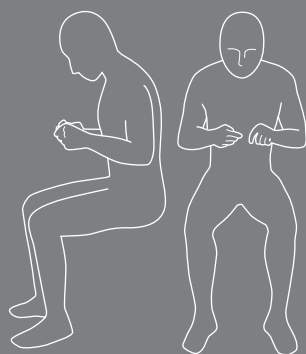

実習 Training

■様々な分野の実習

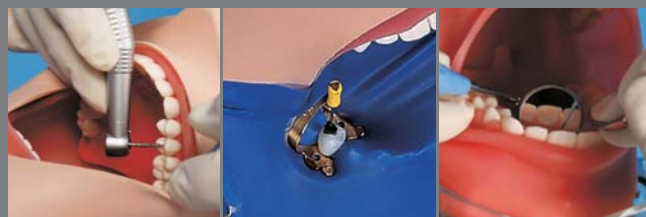


■患者さんと術者との位置関係



■術者の作業位置



■レストの取り方

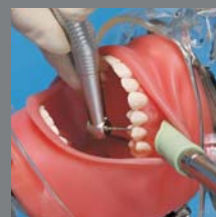

【取り付け場所(状況)の提案】

■実習机にも



■診療用チェアにも



■持ち運びにも



■机のない場所でも



環境 Situation



【目的(場面)の提案】

■学校実習にも

■診療室での練習にも

■研修会・勉強会にも

■自宅での練習にも

■デモンストレーションにも

目的や機能に応じて選べる3タイプのシミュレーター

主な実習環境を
移動せずに使用する場合

主な実習環境を
移動して使用する場合


ハイ

ミドル

エコノミー

実習可能な項目

NISSIM Type.2 (P12)

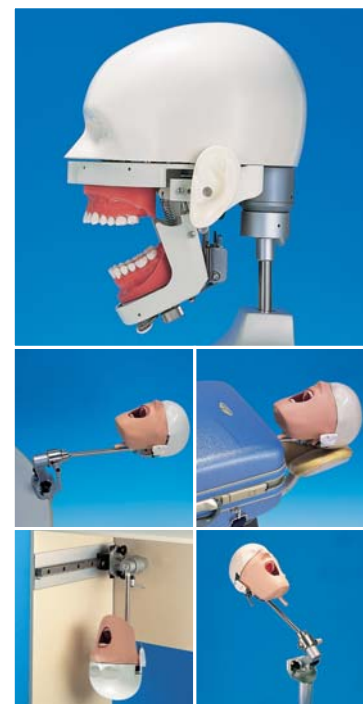

様々な顎運動ができ、フェイスボー実習も可能なハイクレードシミュレーター。学校での実習を想定した様々な機能と耐久性を持たせています。

顎運動が可能な咬合器を装着

フェイスボー実習可能

模型装着もマグネットで簡単

NISSIM Type.1 (P14)




マグネットで模型を開口固定できフェイスボー実習も可能なミドルグレードシミュレーター。お求めやすいよう、機能と価格を両立させています。

優れた耐久性

フェイスボー実習可能

模型装着もマグネットで簡単

シンプルマネキン (P16)

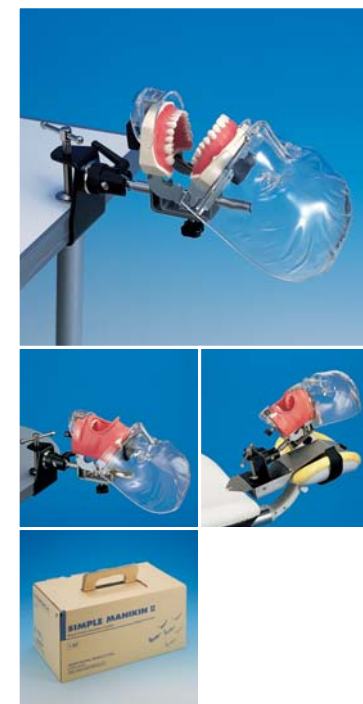

診療室や自宅などの環境において使いたい時に簡単に設置できる、軽量かつコンパクトなエコノミータイプのシミュレーターです。

簡単に組み立て、サッと実習

軽量・コンパクトで場所も選ばません

机にもチェアにも簡単装着

※X線撮影タイプはP79に別途記載しています。



国内未発売 NISSIM Type.2

様々な顎運動が可能な平均値咬合器を備えたハイグレードシミュレーター。ヘッド部にイヤーを付与することでフェイスポートランスファーを想定した、より複雑な実習を行うことができます。

また、模型を簡単に装着できるマグネットチェンジシステムを採用することにより、模型着脱時の操作性を向上させました。

◆対応環境

実習機 診療用チェアー レール収納 スタンドアローン

◆機能

各種顎運動 フェイスポートランスファー マグネットチェンジシステム 高耐久性

装着できる顎模型について

■そのままの状態に取り付けられるモデル
マグネットプレート装着したモデルは、そのままの状態に装着することができます。



■モデルアダプター（オプション）が必要なモデル
マグネットプレートが装着されていないモデルや石こうモデルは、別売のモデルアダプターを用いて装着することができます。



●基本セット



NISSIM Type.2 ヘッド



NISSIM Type.2 咬合器 A



頬粘膜ボックス NISSIM Type.2用



NISSIM マスク

●セットバリエーション



■実習機に取り付ける デスククランプユニットセット

実習機にクランプで簡単に取り付けられるタイプのマウントセットです。



デスククランプユニット

デスククランプユニット + 基本セット

■構成

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●デスククランプユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。



■診療用チェアーに取り付ける ポデイトランクユニットセット

診療用チェアーユニットにバンドで固定するタイプのマウントセット。未使用時には、キャスター付きのトランクに収納できます。



ポデイトランクユニット

ポデイトランクユニット + 基本セット

■構成

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●ポデイトランクユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。



■実習機の下に収納する レールユニットセット

実習機の側面に取り付け、机の下に収納し引き出して使用するためのセットです。 [要設置工事](#)



レールユニット

レールユニット + 基本セット

■構成

【基本セット】

●基本セット


【マウントユニット】

●レールユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。

※設置工事が別途必要です。取り付け工事費については別途ご相談ください。

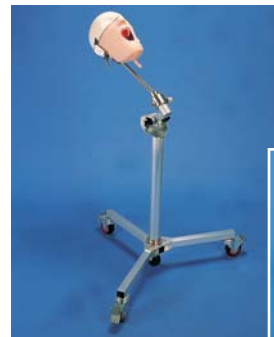

■スタンドアローンで使用する モービルユニットセット

机がない場所でも、また移動してもインストラクターがデモンストレーションを行えるようにしたキャスター付きのマウントユニットセットです。



モービルユニット

モービルユニット + 基本セット

■構成

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●モービルユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。

●オプション




■ラバーシートを用いて実習する場合 ラバーシートセット

ラバーシートを使用する場合は、専用のBタイプ咬合器が必要となります。



ラバーシート

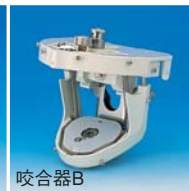

咬合器B

■構成

【ラバーシートセット】

●NISSIM Type.2 ヘッド

●NISSIM Type.2 咬合器B

●NISSIM ラバーシート



モデルアダプターセット

マグネットプレートが装着されていない顎模型や石こう模型は、そのままでは装着できません。そのため、モデルアダプターを用いて装着します。

モデルの歯列数によってSタイプとLタイプの2種類あります。

■種類

●28歯列用 Sタイプ

●32歯列用 Lタイプ



中間開口ストッパー

中間開口が必要な場合、咬合器下弓に取り付けて使用します。



中間開口ストッパー

誠に申し訳ありませんが、このページに掲載のNISSIM Type.2は、
海外向け商品のため日本では発売致しておりません。予めご了承ください。



2007年3月 発売予定 NISSIM Type.1

NISSIM Type.2の操作性はそのままにより使いやすく機能を抑えたミドルグレードシミュレーター。ヘッド部にイヤー部を付け、フェイスボー実習も行うことができます。また、マグネットチェンジシステムを採用することにより、模型の取り付け、交換もよりスムーズに行うことができます。

◆対応環境

実習机 診療用チェアー スタンドアローン

◆機能

開口固定 マグネットチェンジシステム* フェイスボー実習 高耐久性

※上顎のみ

装着できる顎模型について

■そのままの状態に取り付けられるモデル

顎模型にマグネットプレートを用意FE咬合器やD咬合器を装着したモデルは、そのままの状態では装着することができます。



■オプションパーツを必要とするモデル

FE咬合器などを装着していない顎模型や石こう模型は、そのままの状態では装着することができません。オプションパーツの石こう模型用FE咬合器を用いて装着することができます。



■モデルアダプタープレートが必要な場合

頬粘膜ボックスを使用する場合は、モデルアダプタープレートを用いて装着する事ができます。モデルアダプタープレートは基本セットに付属されています。



●基本セット



NISSIM Type.1 ヘッド



NISSIM Type.1 咬合器 C



NISSIM マスク



頬粘膜ボックス NISSIM Type.1用



モデルアダプタープレート

●セットバリエーション



■実習机に取り付ける

デスクトップセット

実習机にクランプで簡単に取り付けるタイプのマウントユニットセットです。



デスククランプユニット

デスククランプユニット + 基本セット

■構成品／標準価格

【基本セット】


●基本セット

【マウントユニット】

●デスククランプユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。

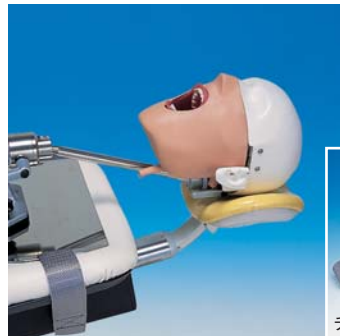

■診療用チェアーに取り付ける チェアーマウントセット

診療用チェアーユニットにバンドで固定するタイプのマウントユニットセット。診療用チェアーにあわせてバンドの長さを調整して固定します。



チェアーマウントユニット

チェアーマウントユニット + 基本セット

■構成品／標準価格

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●チェアーマウントユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。



■実習机の下に取り付ける デスクマウントユニットセット

実習机の下に取り付け、固定して使用するためのマウントユニットセットです。 **要設置工事**



デスクマウントユニット

デスクマウントユニット + 基本セット

■構成品／標準価格

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●デスクマウントユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。

※実習机によって使用が異なります。価格については別途ご相談ください。

※設置工事が別途必要です。取り付け工事費については別途ご相談ください。



■スタンドアローンとして使用する モバイルユニットセット

机がない場所でも、また移動してもインストラクターがデモンストレーションを行えるようにしたキャスター付きのマウントユニットセットです。



モバイルユニット

モバイルユニット + 基本セット

■構成品／標準価格

【基本セット】

●基本セット

【マウントユニット】

●モバイルユニット

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更することができます。

●オプション




■ラバーシートを用いて実習する場合 ラバーシートセット

ラバーシートを使用する場合は、専用のDタイプ咬合器が必要となります。



ラバーシート

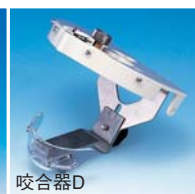

咬合器D

■セット内容

●NISSIM Type.1 咬合器D

●NISSIM ラバーシート



石こう模型用FE咬合器

そのままでは取り付けられない石こうモデルや咬合器の装着されていないモデルに使用する咬合器です。



石こう模型用FE咬合器

誠に申し訳ありませんが、このページに掲載のNISSIM Type.1は、2007年3月の発売を予定しております。予めご了承ください。



シンプルマネキンⅡ

シンプルマネキンは、診療室などで時間が空いたときなどのちょっとした練習の際、移動やセッティングにも労力や時間がかかりにくいよう、軽量かつコンパクトに設計したエコノミータイプのシミュレーターです。顎模型の上顎はヘッドベース部のネジで、また下顎はロウアープレートにて開口状態で固定されます。様々な顎模型やオプションの頬粘膜ボックスなどと組み合わせることによって、実際の臨床の状況を想定した様々な分野のトレーニングを実践的かつ効率的に行うことができます。

◆対応環境

実習机 診療用チェアー 持ち運び

◆機能

開口固定 軽量 コンパクト 簡単組み立て

装着できる顎模型について

■そのままの状態に取り付けられるモデル

顎模型にFE咬合器などの咬合器を装着し、模型底面中央にネジ穴やマグネットプレートが装着されたモデルの場合、そのままの状態ですべて装着することができます。



■セット付属品のPSアダプターを用いて取り付けられるモデル

顎模型にFE咬合器などの咬合器を装着し、模型底面中央にネジ穴や金属板がないモデルの場合、PSアダプターを用いて装着します。PSアダプターは、シンプルマネキンⅡセットに付属されています。



■オプションパーツを用いて取り付けられるモデル

FE咬合器などを装着していない顎模型や石こう模型などは、そのままの状態では装着することができません。オプションパーツの石こう模型用FE咬合器を用いて装着することができます。



●シンプルマネキンⅡセット



シンプルマネキン ベンチマウント



シンプルマネキン ヘッドベース



シンプルマネキン マスクⅡ



シンプルマネキン PSアダプター




六角レンチ

●セットバリエーション

■実習机に取り付けて使用するベンチマウントセット


実習机にクランプで簡単に取り付けられるマウントユニットのセットです。

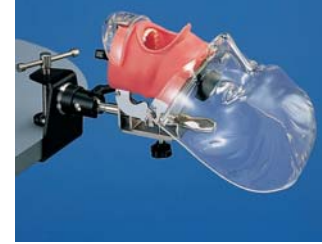

頬粘膜ボックス マネキン用

■診療用チェアーに取り付けるチェアーマウントセット

診療用チェアーのヘッドレストに固定するためのセットです。診療用チェアーのヘッドレストに合わせてバンドの長さを調整して固定します。

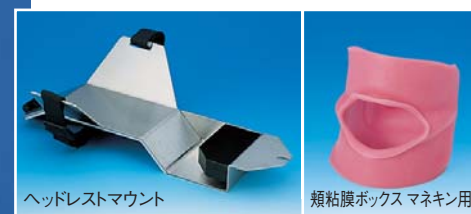

ヘッドレストマウント

頬粘膜ボックス マネキン用

シンプルマネキンⅡセット + 頬粘膜ボックス

■構成品／標準価格

【基本セット】

●シンプルマネキンⅡセット

【マウントユニット】

セットにマウントユニットが含まれているため必要ありません。

【オプション】

●頬粘膜ボックス マネキン用

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更できます。

ヘッドレストマウント + シンプルマネキンⅡセット + 頬粘膜ボックス

■構成品／標準価格

【基本セット】

●シンプルマネキンⅡセット

【マウントユニット】

●ヘッドレストマウント

【オプション】

●頬粘膜ボックス マネキン用

※顎模型は含まれておりません。

※構成は一例です。用途に応じて組み合わせを変更できます。

●オプション

頬粘膜ボックス マネキン用

口腔領域をより認識しやすいよう頬粘膜を想定したカバー。伸縮性に優れた材質により、模型への装着も簡単。より臨床に近い実習を体験することができます。



頬粘膜ボックス マネキン用




石こう模型用FE咬合器

そのままでは取り付けられない石こう模型や咬合器の装着されていない顎模型に使用する咬合器です。



石こう模型用FE咬合器


頬粘膜ボックスの取り付け方法

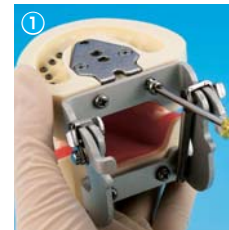

顎模型の後方にある4ヶ所のネジを緩め咬合器を取り外します。



頬粘膜ボックス内の口唇を広げ顎模型の上下を間違えずに片顎ごとに挿入します。
※顎模型の各ネジ穴と頬粘膜ボックスの各穴を合わせてください。

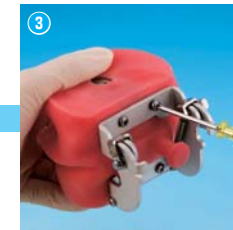

顎模型を咬合させた後、咬合器の上下を間違わないようネジを軽く締め、咬合器を仮止めします。



その後写真の順で4ヶ所ネジを締め付け固定します。



模型歯の脱着方法

○模型歯の外し方



付属のドライバーを用いて顎模型の裏側の模型歯固定用ネジを外します。



模型歯を抜き取ります。

この時、固定用ネジが模型歯に残っていないことを確認してから抜き取ってください。無理に引き抜くと模型歯のネジ穴が潰れ、再固定できなくなることがあります。

○模型歯の取り付け方



模型歯を正しい位置に差し込みます。



模型に付属のドライバーを用いて、顎模型の裏側から固定用ネジを仮止めします。

ここでは強く締めないようにしてください。



すべての模型歯を仮止め後、咬合器を閉じます。正しく噛み合った状態で固定用ネジを締めつけます。

この時、強く締めすぎるとネジ穴が潰れることがあります。ネジ穴が潰れるとネジが空回りして再固定できなくなります。模型歯が動かない程度の軽い力で締めてください。



模型歯用プラスドライバー

模型歯を顎模型に固定する際に使用するドライバーです。
ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。



模型歯固定用ネジ

模型歯を固定するためのネジです。ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。

容量
●1本入

補綴分野

Restorative Dentistry



クラウン・ブリッジ補綴領域

- ・実習用基本モデル P20
- ・交換用模型歯・オプション模型歯 P21
- ・その他の交換用パーツ・オプションパーツ P22
- ・その他のモデル P24



部分床義歯補綴領域

- ・実習用基本モデル P26
- ・交換用模型歯・オプション模型歯 P27



インプラント領域

- ・インプラント総合実習モデル P30
- ・ドリリング実習モデル P31
- ・サイナスリフト実習モデル P32



無歯顎補綴領域

- ・実習用基本モデル P34
- ・その他のモデル P35



顎口腔機能領域

P20

P21

P22

P24

P24

P26

P27

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P37

P38

クラウン・ブリッジ補綴領域を極める。
豊富なバリエーションの500Aシリーズ。

症例によって選択される様々な歯冠補綴物。それらをより早く正確に施術するためには最終補綴物をイメージした、様々なテクニックが必要となります。それらの修得の第一歩には支台形成時のハンドリングや切削削などを理解するため、基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。500Aシリーズは切削感など補綴実習に必要な機

能を持ち、行いたい施術をより早く理解し修得できるよう色々なバリエーションの中から目的に応じた選択が可能です。また、豊富なオプション模型歯と組み合わせることにより、より実践的なテクニックへのステップアップが可能です。



支台歯形成・窩洞形成／500Aシリーズ全て

切削感を体感しながら様々な形成方法が修得できるよう、全ての部位にタービンでの形成に適した切削性を備えた模型歯を装着しています。模型歯は、実習時に動きにくく、かつ簡単に交換できるようにネジで顎模型に固定されています。



印象採得／500Aシリーズ全て

歯肉粘膜は、ソフトタイプとハードタイプのモデルがあり、ソフトタイプ粘膜を装着したD18やD16シリーズでは、歯肉圧排から印象採得までの一貫した実習が可能です。またD18タイプでは、シリコン印象材を用いた精密印象採得も可能です。



補綴物の装着／500Aシリーズ全て

支台歯・窩洞形成を施した模型歯により、暫間・最終補綴物のコンタクトやマージン調整、補綴物装着や咬合調整までの一貫した実習が可能です。

オプション模型歯でさらに広がる実習用途



より実践的な形成実習／A20A、A22A

模型歯をより切削性に優れたA20シリーズや、髄室が付与されたA22シリーズなどと組み替えることで歯質の削除量を勘案した、より実践的な実習へとステップアップすることができます。→P22



軟化象牙質の除去／A26A

様々なう蝕を想定したA26シリーズに組み替えることで、軟化象牙質の除去や感染歯質の削除量を勘案したより実践的な実習が可能です。→P24



支台築造、ポストコアー形成／A50、A12A、A22A

予めポストコアー形状に形成されたA50シリーズと組み合わせることにより、支台築造実習も可能となります。また根管を付与したA12シリーズやA22シリーズの模型歯では、ポストコアー形成から支台築造までの実習が可能です。→P22



ブリッジの支台歯形成／A2A-565

歯列の欠損状態を自由に変更できる欠損プラグA2A-565シリーズと組み合わせることで、支台歯の平衡形成が必要となるブリッジの支台歯形成も可能になります。→P24

補綴修復用顎模型 [D18FE-500A-QF]

ソフトタイプ粘膜を装着し、シリコン印象材を用いた精密印象採得が可能な顎模型。支台歯形成や窩洞形成、印象採得から補綴物装着までの総合的な実習が可能です。

■バリエーション／標準価格
●D18D-500A-QF (D咬合器つき) ●D18-500A-QF (咬合器なし)

■構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D18-500A用粘膜 500A-F-GUB
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成	窩洞形成	個人・個歯レ製作	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	暫間補綴物製作・装着	最終補綴物製作・装着
-------	------	----------	------	------------	--------	------------	------------



D18FE-500A-QF

補綴修復用顎模型 [D16FE-500A (GSF)-QF]

ピンク色ソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。D18モデルより伸びの良い材質のため、歯肉圧排糸が挿入しやすくなっています。

■バリエーション／標準価格
●D16D-500A (GSF)-QF (D咬合器つき) ●D16-500A (GSF)-QF (咬合器なし)

■構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500A用粘膜 (ピンク色) 500A-F-GSF
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成	窩洞形成	個人・個歯レ製作	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	暫間補綴物製作・装着	最終補綴物製作・装着
-------	------	----------	------	------------	--------	------------	------------



D16FE-500A (GSF)-QF ピンク

補綴修復用顎模型 [D16FE-500A (GSE)-QF]

クリアピンク色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。半透明粘膜のため、歯肉縁下のマージンや歯肉圧排糸などが粘膜を通じて確認することができます。

■バリエーション／標準価格
●D16D-500A (GSE)-QF (D咬合器つき) ●D16-500A (GSE)-QF (咬合器なし)

■構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500A用粘膜 (クリアピンク色) 500A-F-GSE
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成	窩洞形成	個人・個歯レ製作	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	暫間補綴物製作・装着	最終補綴物製作・装着
-------	------	----------	------	------------	--------	------------	------------



D16FE-500A (GSE)-QF クリアピンク

補綴修復用顎模型 [D16FE-500A (GSD)-QF]

クリア色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。透明粘膜のため、歯肉縁下のマージンや歯肉圧排糸などが500Aシリーズ中、最も見やすくなっています。

■バリエーション／標準価格
●D16D-500A (GSD)-QF (D咬合器つき) ●D16-500A (GSD)-QF (咬合器なし)

■構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500A用粘膜 (クリア色) 500A-F-GSD
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成	窩洞形成	個人・個歯レ製作	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	暫間補綴物製作・装着	最終補綴物製作・装着
-------	------	----------	------	------------	--------	------------	------------



D16FE-500A (GSD)-QF クリア



D51FE-500A

2色レジン製顎模型 [D51FE-500A-QF]

形成実習に特化させたハードタイプ粘膜の顎模型。
ハード粘膜のため、印象採得は行えますが歯肉圧排などの歯肉縁下に至る実習はできません。

■バリエーション／標準価格
●D51D-500A-QF (D咬合器つき) ●D51-500A-QF (咬合器なし)

■構成品
●単根模型歯 永久歯 A5A-500
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ハードタイプ粘膜
粘膜交換不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯形成

窩洞形成

個人・個歯レ製作

歯肉圧排

アルジネート連合印象

シリコン印象

■ 暫間補綴物製作・装着

■ 最終補綴物製作・装着

●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 永久歯 [A5A-500]

顎模型500Aシリーズに予め装着されている模型歯。歯冠部は解剖学的形態を採用しています。

□部位 28歯

■バリエーション／標準価格

●セット

支台歯形成

窩洞形成



切削用模型歯 [A20A-500]

エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。A5模型歯より切削感を天然歯に近づけています。

□部位 7654321 1234567

76543 34567 の24部位

■バリエーション／標準価格

●セット

支台歯形成

ラミネートベニア形成

窩洞形成



歯内療法用模型歯 [A12A-500]

髄室・根管を付与し髄壁を赤く染色させた模型歯。A5模型歯よりも軟かい材質で作られています。

□部位 6 4 1 1 4 6
65 56 の10部位*

※前歯部や下顎小臼歯部では顎模型への固定の関係上、根管にネジが貫通しています。申し訳ありませんが、実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のもをご使用ください。

■バリエーション／標準価格

●セット

●ネジなし仕様 A12-500

支台築造

ポストコア形成



歯内療法用模型歯 [A22A-500]

A20模型歯に髄室・根管を付与し髄壁を赤く染色させた模型歯。支台築造実習やより臨床に近い形成実習が可能です。

□部位 6 4 1 1 4 6
65 56 の10部位*

※前歯部や下顎小臼歯部では顎模型への固定の関係上、根管にネジが貫通しています。申し訳ありませんが、実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のもをご使用ください。

■バリエーション／標準価格

●セット

●ネジなし仕様 A22-500

支台築造

ポストコア形成

支台歯形成

窩洞形成

支台・窩洞形成模型歯 [A55A/A50Aシリーズ]

A5模型歯をベースにフェーシングクラウンや2級窩洞など様々な形成が施されています。

□部位 右ページの一覧表を参照してください。

※申し訳ありませんが、ポストコアはその形成の関係上、固定用ネジは付きません。そのため模型への装着はユーティリティワックスなどで仮留してお使いください。

■バリエーション／標準価格

●ポストコアのみ(ネジなし) A50-〇〇

支台築造

印象採得

■ 暫間補綴物製作

■ 最終補綴物製作



A55A-各種 170 162 219 469 454 343



A50A-各種 178 176 177 178 367 466

A50A・A55A 支台・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.	形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.
フェーシングクラウン	1	A55A-110	1	A55A-210	ジャケットクラウン	1	A55A-111	1	A55A-211
	2	A55A-120	2	A55A-220		2	A55A-121	2	A55A-221
	3	A55A-130	3	A55A-230		3	A55A-131	3	A55A-231
	4	A55A-140	4	A55A-240		4	A55A-141	4	A55A-241
	5	A55A-150	5	A55A-250		5	A55A-151	5	A55A-251
	6	A55A-160	6	A55A-260		6	—	6	—
	7	A55A-170	7	—		7	—	7	—
	1	A55A-410	1	A55A-310		1	—	1	—
	2	A55A-420	2	A55A-320		2	—	2	A55A-321
	3	A55A-430	3	A55A-330		3	A55A-431	3	A55A-331
	4	A55A-440	4	A55A-340		4	A55A-441	4	A55A-341
	5	A55A-450	5	A55A-350		5	—	5	A55A-351
	6	A55A-460	6	—		6	A55A-461	6	—
	7	—	7	—		7	—	7	A55A-371
フルキャストクラウン	4	A55A-142	4	A55A-242	アンレー	4	A55A-145	4	—
	5	A55A-152	5	A55A-252		5	—	5	—
	6	A55A-162	6	A55A-262		6	A55A-169	6	—
	7	A55A-172	7	A55A-272		7	—	7	A55A-275
	4	A55A-442	4	A55A-342		4	—	4	—
	5	A55A-452	5	A55A-352		5	—	5	—
	6	A55A-462	6	A55A-362		6	A55A-465	6	A55A-365
	7	A55A-472	7	A55A-372		7	—	7	—
1級窩洞	4	A55A-143 ㊦	4	A55A-243 ㊦	2級MOD窩洞	4	A50A-146 ㊦	4	A50A-246 ㊦
	5	A55A-153	5	—		5	A50A-156 ㊦	5	A50A-256 ㊦
	6	A55A-163 ㊦	6	A55A-263 ㊦		6	A50A-166 ㊦	6	A50A-266 ㊦
	7	—	7	A55A-273		7	—	7	A50A-276 ㊦
	4	—	4	A55A-343 ㊦		4	—	4	—
	5	A55A-453 ㊦	5	A55A-353 ㊦		5	A50A-456 ㊦	5	—
	6	A55A-463 ㊦	6	A55A-363 ㊦ ㊧		6	A50A-466 ㊦	6	A50A-366
	7	A55A-473 ㊧	7	A55A-373 ㊦		7	—	7	—
2級MO窩洞	4	A55A-144 ㊦	4	A55A-244 ㊦	2級OD窩洞	4	—	4	—
	5	A55A-154 ㊦	5	A55A-254 ㊦		5	—	5	—
	6	A55A-164 ㊦	6	A55A-264 ㊦		6	—	6	—
	7	A55A-174 ㊦	7	A55A-274 ㊦		7	—	7	—
	4	—	4	—		4	A55A-444 ㊦	4	—
	5	—	5	A55A-354 ㊦		5	A55A-454 ㊦	5	—
	6	A55A-464 ㊦	6	A55A-364 ㊦		6	—	6	—
	7	A55A-474 ㊦	7	—		7	—	7	—
3級窩洞	1	A50A-113 ㊦	1	—	4級窩洞	1	A55A-114 ㊦	1	A55A-214 ㊦
	2	A50A-123 ㊦	2	A50A-223 ㊦		2	A55A-124 ㊦	2	A55A-224 ㊦
	3	—	3	—		3	—	3	—
	1	—	1	—	5級窩洞	1	A55A-115	1	A55A-215
	2	—	2	—		2	—	2	—
	3	A50A-433	3	—		3	A55A-135	3	A55A-235
ピンブリッジ	1	A50A-116	1	A50A-216		1	—	1	—
	2	—	2	—		2	—	2	—
	3	A50A-136	3	A50A-236		3	A55A-435	3	A55A-335
3/4クラウン	1	A50A-117	1	A50A-217	4/5クラウン	4	A50A-147	4	A50A-247
	2	—	2	—		5	A50A-157	5	A50A-257
	3	A50A-137	3	A50A-237		6	—	6	A50A-267
	4	—	4	—		7	—	7	—
	5	—	5	—		4	A50A-447	4	A50A-347
	1	—	1	—		5	A50A-457	5	A50A-357
	2	—	2	—		6	A50A-467	6	A50A-367
	3	—	3	—		7	—	7	—
	4	—	4	—	ポストクラウン	1	A50-118	1	A50-218
	5	A50A-459	5	—		2	A50-128	2	A50-228
7/8クラウン	6	—	6	—		3	A50-138	3	A50-238
	7	A55A-179	7	A55A-279		4	—	4	—
	6	A55A-469	6	—		5	—	5	—
	7	—	7	—		1	—	1	—
プロキシマルハーフクラウン	7	A50A-178	7	—		2	—	2	—
	7	A50A-478	7	A50A-378		3	A50-438	3	A50-338
ラミネートベニア	1	A55A-119A	1	A55A-219		4	A50-449A	4	—
	2	A55A-129	2	A55A-229		5	—	5	A50-359

※表中の記号 ㊦:メタル ㊦:アマルガム ㊦:レジン ㊦:複雑窩洞



A2A-565
欠損プラグ [A2A-565]
顎模型500Aシリーズを簡易的に欠損状態にするための部品です。欠損させたい部位に模型歯と同じように装着させて使用します。
□部位 28歯



A10
【特注品】 歯冠補綴物模型歯 [A10シリーズ]
支台・窩洞形成に合わせた樹脂製歯冠補綴物。補綴物装着を想定した実習などに使用できます。
※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

補綴物
装着



A26A
【特注品】 カリエス模型歯 [A26Aシリーズ]
切削性に優れたA20模型歯にカリエスを付与した模型歯。感染歯質の削除を勘案したより臨床に近い形成実習が可能です。
※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

窩洞
形成
支台歯
形成
軟化
象牙質の
除去




A5SA-500
切削評価用模型歯 [A5SA-500]
A5模型歯の切削性はそのままに表面をつや消し状態にした評価用模型歯。レーザーでの形状計測が可能です。
□部位

6	4	21	12	4	6
6	4		4	6	

 の12部位

支台歯
形成
窩洞
形成
切削
評価

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ

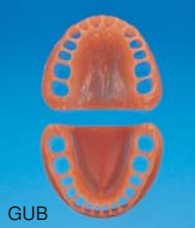

D18-500A用粘膜
MODEL NAME
●500A-F-GUB



ピンク (GSF)



クリアピンク (GSE)



クリア (GSD)

D16-500A用粘膜
MODEL NAME
●ピンク (500A-F-GSF)
●クリアピンク (500A-F-GSE)
●クリア (500A-F-GSD)



舌模型 [Z-1]
舌排除の練習に使用する模型。ソフトタイプ粘膜が装着されたD18、D16タイプの模型に装着可能です。模型後部からクリップで固定します。

※顎模型は含まれません。

Others

その他のモデル



T1-PP (プリントつき)



T1-PP (プリントなし)

プレパレーションプレート
[T1-PP (プリントつき)]

実習初期における基本的なタービンのもち方や動かし方などを修得するための試験体型モデル。材質と色の異なる3層からなり切削中の感覚の違いと切削後の切削量が目視にて分かるようになっています。また、模型表面には咬合面のイラストがプリントされています。

バリエーション／標準価格
●T1-PP (プリントなし)



切削用複製根模型歯 [B20-500]


抜去歯の代替用に作られた天然歯根形態の模型歯。500Aシリーズのゴム陰型に植立できるよう歯冠部の形状はA5模型歯と同一とし、エナメル質には切削性に優れたA20模型歯と同じ材質を用いています。

□部位

76543	1	1234567
7654		3456

 の21部位

支台歯
形成
窩洞
形成

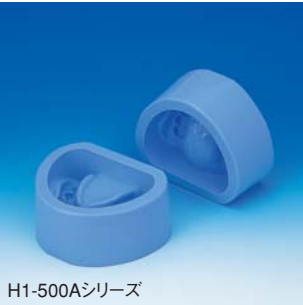

石こう模型用陰型 [H1-500Aシリーズ]
顎模型500Aシリーズと同形態の石こう模型製作型用のゴム枠です。販売は、片顎ずつとなります。

バリエーション
28ページの一覧表を参照してください。

使用方法



① 気泡混入防止のためワックスパターン清掃材(キャストメイト)を軽く噴霧します。



② 実習を行う部位の模型歯をゴム枠に植立します。




③ 練和した石こうをゆっくりと流し込みます。



④ 周りからエアーを静かにかけて模型を取り外します。



⑤ 模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

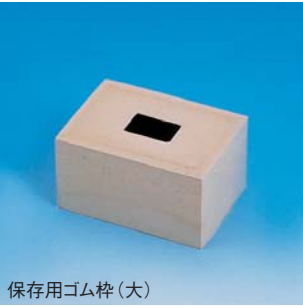

保存用ゴム枠(大)

保存用ゴム枠(大)

抜去歯や複製根模型歯の形成実習の際、手に持ちやすくするための土台製作用ゴム陰型。サイズは、大と中の2種類あります。

バリエーション／標準価格
●保存用ゴム枠(中)

サイズ
●(大) W56×D40×H31 (mm)
●(中) W45×D35×H35 (mm)

使用方法



① 気泡混入防止のためワックスパターン清掃材(キャストメイト)を軽く噴霧します。




② 練和した石こうをゆっくりと流し込みます。



③ 直ちに模型歯を植立させます。



④ 周りからエアーを静かにかけて取り外します。

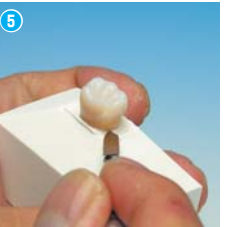

⑤ 模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

部分床義歯補綴領域を極める。
E50シリーズ。

色々な症例によって様々な設計される部分床義歯補綴物。それらをより早く正確に施術するためには様々なテクニックが必要となります。そのためには、レスト形成時のハンドリングや切削圧などを体感しながら基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。

E50シリーズは、28ページに掲載している約70種類にわたる欠損状態を表現したバリエーションがあります。実習の目的に応じて、模型歯の着脱できるタイプのE50モデルや一体型タイプのE1モデル、石こう製のE3モデルなどからそれぞれ選択が可能です。



レスト形成／E50シリーズ

E50モデルでは、全ての部位においてタービンでの形成に適した切削性を持った模型歯を装着しており、切削感を体感しながら様々な形成方法が修得できます。また模型歯は、ワックスで顎模型に仮着されており簡単に交換できます。



印象採得／E50シリーズ、E1シリーズ

レジン製のE50モデルやE1モデルを用いて、既成トレーを用いたスナップ印象や個人トレーを用いた印象採得の実習が行えます。
※ハードタイプ粘膜のため、歯肉圧排はできません。



部分床義歯の診査・製作／E3シリーズ、H1シリーズ

石こう製のE3モデルを用いて、サーベヤーを用いた症例の診査から個人トレーや、咬合床の製作、義歯の設計や製作までの一貫した技工実習を行うことができます。

オプション模型歯でさらに広がる実習用途



より実践的な形成実習／A20、A22

模型歯をより切削性に優れたA20シリーズや、髄室が付与されたA22シリーズなどと組み替えることで歯質の削除量を勘案した、より実践的な実習へとステップアップすることができます。→P29




ブリッジの製作・装着／A55、A50

予め支台・窩洞形成されたA55・A50シリーズと組み合わせることにより暫間・最終補綴物を製作しコンタクトやマージン調整、補綴物装着や咬合調整などの実習が可能です。→P29




支台築造、ポストコアー形成／A50、A12、A22

予めポストコアー形状に形成されたA50シリーズと組み合わせることにより、支台築造実習も可能となります。また根管を付与したA12シリーズやA22シリーズの模型歯では、ポストコアー形成から支台築造までの実習が可能です。→P29

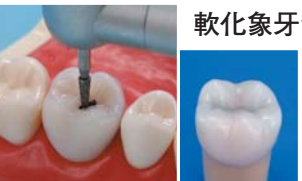

軟化象牙質の除去／A26

様々な蝕を想定したA26シリーズに組み替えることで、軟化象牙質の除去や感染歯質の削除量を勘案したより実践的な実習が可能です。→P24

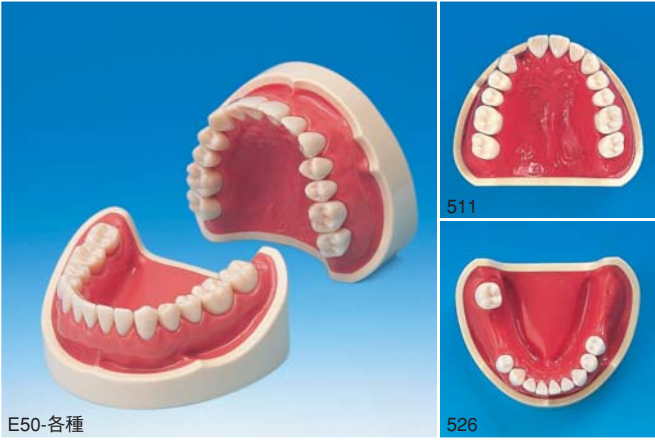

E50-各種

2色レジン製顎模型 [E-50各種]

種々の欠損状態を表現し模型歯の交換が可能なハード粘膜タイプの顎模型。別売の支台・窩洞形成歯と組み合わせることにより様々な症例を表現することができます。型番号は、片顎ではE50-500となり、上下顎ではD50-500／500となります。

バリエーション／標準価格
●D50FE-各種(上下顎 FE咬合器つき) ●D50D-各種(上下顎 D咬合器つき)
●D50-各種(上下顎 咬合器なし)

構成品
●単根模型歯 永久歯 A5-500
□部位 28歯

模型歯交換可 咬合器装着可*	模型歯フックス止め シンプルマネキン装着可*	ハードタイプ粘膜 マグネットプレート非装着
-------------------	---------------------------	--------------------------

※上下顎咬合器装着モデルのみPSアダプターにより装着可能。

レスト形成 印象採得 補綴物製作 補綴物装着



E1-各種

1色レジン製顎模型 [E1-各種]

E50モデルと同一形態の1体型顎模型。模型歯と顎模型が一体のため模型歯の着脱はできません。型番号は、片顎ではE1-500となり、上下顎ではD1-500／500となります

バリエーション／標準価格
●D1FE-各種(上下顎 FE咬合器つき) ●D1D-各種(上下顎 D咬合器つき)
●D1-各種(上下顎 咬合器なし)

模型歯交換不可 咬合器装着可*	模型歯・顎一体型 シンプルマネキン装着可*	レジン製モデル マグネットプレート非装着
--------------------	--------------------------	-------------------------

※上下顎咬合器装着モデルのみPSアダプターにより装着可能。

レスト形成 印象採得 補綴物製作 補綴物装着



E3-各種

石こう製顎模型 [E3-各種]

E50モデルと同一形態の石こう製顎模型。型番号は、片顎ではE3-500となり、上下顎ではD2-500／500となります。

バリエーション／標準価格
●D2-各種(上下顎)

模型歯交換不可 咬合器装着不可	模型歯・顎一体型 シンプルマネキン装着可*	石こう製モデル マグネットプレート非装着
--------------------	--------------------------	-------------------------

※オプションパーツによる

レスト形成 印象採得 補綴物製作 補綴物装着



H1-各種

石こう模型用陰型 [H1-各種]
















E50モデルと同一形態の石こう用ゴム製陰型。そのまま石こうを流したり、模型歯を植立した後石こうを流したりして模型を製作します。販売は、片顎ずつとなります。

石こうモデル用ゴム枠


レスト形成 印象採得 補綴物製作 補綴物装着

●欠損バリエーション

上顎（歯式表示してある部位を欠損させています。）

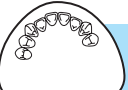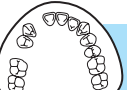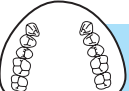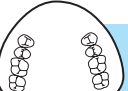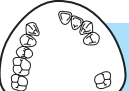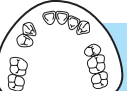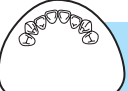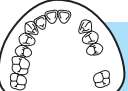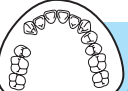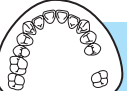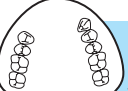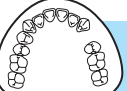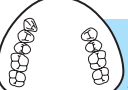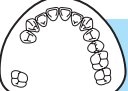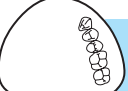 500AU	 525 567	 541 76 567	 557 7621 12456	 573 65 456	 589 5 2
 511 2	 527 2 1 1 2	 543 21 1256	 559 6521 12567	 575 321 123	 591 765432 234567
 513 2	 529 2 1 5 6	 545 652 267	 561 76521 12456	 577 6521 1267	 597 5 2 4
 515 6	 531 654 67	 547 765 456	 563 7651 123567	 579 2 5	 599 765421 124567
 517 6 2	 533 76 456	 549 765 567	 565 2 6	 581 4	 601 6
 519 2 6	 535 65 567	 551 7621 127	 567 7 6 6 7	 583 321 12	 603 4
 521 5 2	 537 765 56	 553 7654 567	 569 7654 4567	 585 21 123	
 523 6 5	 539 765 67	 555 7 ~ 1 12	 571 7654	 587 6 7	

下顎（歯式表示してある部位を欠損させています。）

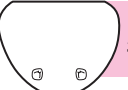 500AL	 520 7 6 5	 530 654 56	 540 21 1267	 550 7654 4567	 562 5
 512 6	 522 7 6 6 7	 532 765 56	 542 7621 12	 552 765421 124567	 564 5
 514 6	 524 7 6 5 6	 534 65 567	 544 765 567	 554 65421 12367	 568 5 6
 516 5 6	 526 6 5 6 7	 536 76 567	 546 7651 126	 558 7651 1	
 518 6 7	 528 7 6 5 6	 538 765 67	 548 7654 567	 560 4 5	

●交換用模型歯、オプション模型歯

単根模型歯 永久歯（ネジなし） [A5-500]

顎模型E50シリーズに予め装着されている模型歯。歯冠部は解剖学的形態を採用しています。

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●セット

レスト形成

支台歯形成

窩洞形成

A5-500

カットモデル

切削用模型歯（ネジなし） [A20-500]

エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。A5模型歯より切削感を天然歯に近づけています。

□部位 7654321 | 1234567
6543 | 34567 の24部位

バリエーション／標準価格

●セット

レスト形成

支台歯形成

窩洞形成

A20-500

カットモデル

歯内療法用模型歯（ネジなし） [A12-500]

髓室・根管を付与し髓壁を赤く染色させた模型歯。A5模型歯よりも軟かい材質で作られています。

□部位 6 4 1 | 1 4 6
65 | 56 の10部位

バリエーション／標準価格

●セット

支台築造

ポストコア形成

A12-500

カットモデル

歯内療法用模型歯（ネジなし） [A22-500]

A20模型歯に髓室・根管を付与し髓壁を赤く染色させた模型歯。支台築造実習やより臨床に近い形成実習が可能です。

□部位 6 4 1 | 1 4 6
65 | 56 の10部位

バリエーション／標準価格

●セット

支台築造

ポストコア形成

支台形成

窩洞形成

A22-500

カットモデル

支台・窩洞形成歯模型（ネジなし） [A55AN/A50AN/A50シリーズ]

A5模型歯をベースにフェーシングクラウンや2級窩洞など様々な形成が施された模型歯です。

□部位 23ページの一覧表を参照してください。

支台築造

印象採得

暫間補綴物の製作・装着

最終補綴物の製作・装着

A55-各種

A50-各種

特注品 カリエス模型歯（ネジなし） [A26シリーズ]

A20模型歯にカリエスを付与した模型歯。感染歯質の削除を勘案したより臨床に近い実習が可能です。

※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

窩洞形成

支台形成

A26-各種

A26-各種

切削評価用模型歯（ネジなし） [A55AN-500]

A5模型歯の切削性はそのままだに、表面をつや消し状態にした評価用模型歯。レーザーでの形状計測が可能です。

□部位 6 4 2 1 | 1 2 4 6
6 4 | 4 6 の12部位

レスト形成

切削評価

支台歯形成

窩洞形成


A55A-500

A55A-500

インプラント領域を極める 色々なバリエーションのインプラントモデルシリーズ

近年不可欠な治療技術となってきたインプラント。骨密度や骨幅など異なる症例によって、様々な形状を持つフィクスチャーを選択し施術するため、その適応症や診査・診断項目など様々な要件や基準を理解する必要があります。それらの修得の第一歩には、フラップやドリリングなどの外科的処置に加え、その後の上部構造種類の理解のため、基礎的なテクニック

を一貫して実習することは欠かせません。インプラントモデルシリーズは、骨の切削感や抵抗感を体感しながら実習できるよう、顎骨部に海綿骨などを想定した材料を用いています。また、そのモデルも基本的な術式を修得するためのモデルやサイナスリフト術が実習可能なモデルなどあり目的に応じて選択が可能です。

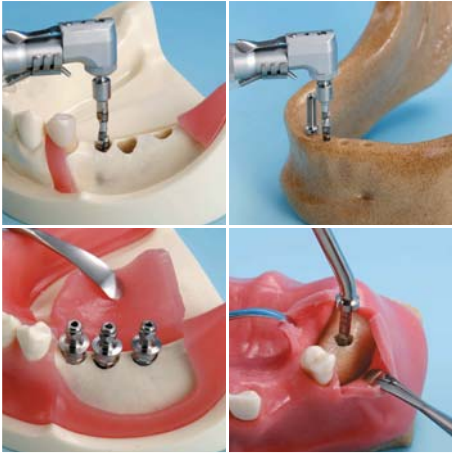

インプラント総合実習／P9-FP.15

FP.15モデルでは、切開感や皮質骨と海綿骨との切削感の違いを体感しながら一貫した実習を行えるよう、粘膜部に切開縫合できる材質を顎骨部には、切削性の異なる2種類の骨材を使用しています。また、実習部位は交換可能なソケット式とし、部分床義歯用ソケットに取り替えることにより欠損補綴におけるトータルシミュレーション実習を行うことができます。



ドリリング実習／P9-X.761、E7-No.6


X.761モデルやE7モデルでは、骨の硬さや切削感を体感しながら適切なエンジンの回転数とトルクを選択した基本的なドリリング術式の修得が可能なよう、種々の骨を想定した骨材を使用しています。また、インプラント埋入部の近遠心的スペースに関する埋入間隔の原則など、埋入時の考慮点を勘案した実習も行うことができます。



サイナスリフト実習／P9-X.827、P9-X.825

X.827モデルやX.825モデルでは、上顎洞側壁の開窓時や上顎洞への穿孔時、粘膜剥離時の感覚を体感できるよう、海綿骨を想定した骨材を用い、上顎洞やシュナイダー膜を付与しています。また、左右側臼歯部で垂直的骨高径を変化させ、サイナスリフトにおけるラテラルウィンドウ法やオステオトーム法のテクニックを実習できるようにしています。

Implant インプラント総合実習

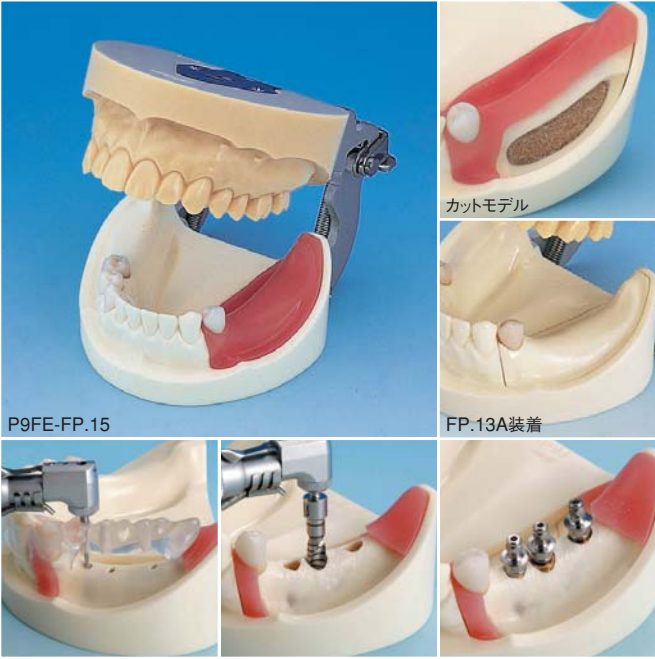

インプラント実習用顎模型 [P9FE-FP.15]

インプラントと部分床義歯の欠損補綴におけるトータルシミュレーションが可能なよう下顎左側臼歯部を交換可能なソケット式にした顎模型。インプラント用ソケットは、粘膜、皮質骨、海綿骨を想定した異なる材質で作られており、切開感に加え、骨の切削感の違いや抵抗感を体感しながらインプラント挿入術や2次手術などの基本的な術式を一貫して実習することができます。また、付属の部分床義歯用ソケットに交換すれば、レスト形成や印象などの両側性遊離端欠損における基本的な術式を実習することができます。

■ バリエーション／標準価格
●P9D-FP.15 (D咬合器つき) ●P9-FP.15 (咬合器なし)

■ 構成品
●単根模型歯 永久歯 A20A-500 ●インプラント用ソケット P9-FP.13B
□部位 5|4 の2部位 ●部分床義歯用ソケット P9-FP.13A
●単根模型歯 永久歯 A5A-500
□部位 4|3 の2部位

インプラント実習部位交換可 模型歯1部交換可能	表皮骨・海綿骨想定骨材 シンプルマネキン装着可	切開・縫合用粘膜 マグネットプレート装着
----------------------------	----------------------------	-------------------------

切開・剥離	ドリリング	インプラント 挿入	縫合	フィクスチャー 開窓	アルジナート 印象	シリコン 印象	アパシカル レストレーション の製作・装着	上部構造の 製作・装着
-------	-------	--------------	----	---------------	--------------	------------	-----------------------------	----------------

●交換用模型歯、部品



切削用模型歯 [A20A-500]

エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯です。予めモデルに装着されています。
□部位 5|4 の2部位

支台歯
形成

レスト
形成



単根模型歯 永久歯 [A5A-500]

歯冠部は解剖学的形態を採用しています。予めモデルに装着されています。
□部位 4|3 の2部位

支台歯
形成

レスト
形成



インプラント用ソケット [P9-FP.13B]

総合的なインプラント実習が可能な交換用ソケット。切開・縫合が可能な粘膜が顎骨部に歯肉剥離が可能なように接着されています。また、顎骨部は皮質骨、海綿骨を想定した硬さの異なる材料で作られています。

■ 構成品
●インプラント用ソケット
●A5A-500 4

切開・縫合

ドリリング

インプラント
挿入

フィクスチャー
開窓



部分床義歯用ソケット [P9-FP.13A]

粘膜部、顎骨部が一体となった部分床義歯実習用のソケットです。

印象採得

Drilling

ドリリング



P9-X.761

インプラント実習用顎模型 [P9-X.761]
フラップやドリリング実習が可能な下顎模型。欠損部位には、パイロットドリルなどを用いたドリリング時の回転数やトルクの修得が可能なよう、皮質骨や海綿骨を想定した材料を用いて作られています。歯肉の切開感や骨の切削感、抵抗感を体感しながらインプラント挿入からフィクスチャー開窓などの基礎的な実習を行うことができます。

皮質骨・海綿骨想定骨材	切開・縫合用粘膜	シンプルマネキン装着不可
マグネットプレート非装着		
切開・剥離	ドリリング	インプラント挿入
縫合	フィクスチャー開窓	アルジネート印象
	シリコン印象	アセトアルの製作・装着
		上部構造の製作・装着




E7-No.6

ドリリング実習用模型 [E7-No.6]
ドリリング実習が可能な下顎骨模型。パイロットドリルなどを用いたドリリング時の回転数やトルクの修得が可能なよう、海綿骨を想定した骨材で作られています。骨の切削感や抵抗感を体感しながらインプラント挿入までの基礎的な実習を行うことができます。

海綿骨想定骨材	シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着
切開・剥離	ドリリング	インプラント挿入
縫合	フィクスチャー開窓	アルジネート印象
	シリコン印象	アセトアルの製作・装着
		上部構造の製作・装着

Sinus lift

サイナスリフト

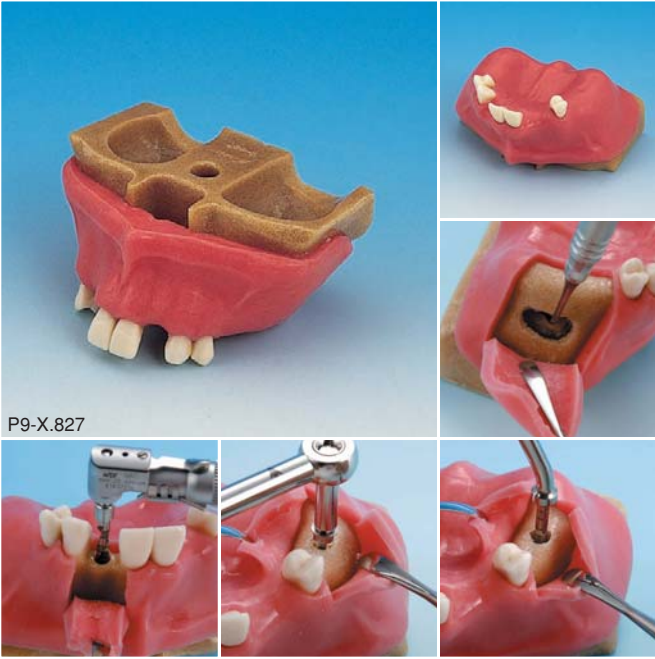

P9-X.827

サイナスリフト実習用模型 [P9-X.827]
上顎洞とシュナイダー膜を付与しサイナスリフト実習が可能な模型。海綿骨を想定した骨材に切開・縫合が可能な粘膜が接着され、前歯欠損部では予めドリリングのための下穴があいており、基本的なインプラント術式を一貫して実習することができます。また、臼歯部の垂直的骨高径を左側では約4mm、右側では約8mmとし、ラテラルウインドウ法やオステオトーム法での実習時に上顎洞側壁の開窓時や上顎洞への穿孔時の感覚、粘膜剥離の感覚を体感できるようにしています。

切開・縫合粘膜	海綿骨想定骨材	シュナイダー膜
粘膜交換不可	シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着
ラテラルウインドウ法	オステオトーム法	切開・粘膜剥離
インプラント挿入	縫合	フィクスチャー開窓
	シリコン印象	アセトアルの製作・装着
		上部構造の製作・装着



P9-X.825

サイナスリフト実習用模型 [P9-X.825]
サイナスリフト実習が可能な無歯顎を想定した上顎骨模型。海綿骨を想定した材料にて作られた顎骨部とシュナイダー膜を想定した薄層粘膜により、上顎洞側壁の開窓時や上顎洞への穿孔時の感覚、粘膜剥離の感覚を体感しながら基礎的なテクニックを実習することができます。また、垂直的骨高径を左側ではラテラルウインドウ法を想定して約4mm、右側ではオステオトーム法を想定して約8mmとしています。

海綿骨想定骨材	シュナイダー膜	シンプルマネキン装着不可
マグネットプレート非装着		
ラテラルウインドウ法	オステオトーム法	切開・粘膜剥離
インプラント挿入	縫合	フィクスチャー開窓
	シリコン印象	アセトアルの製作・装着
		上部構造の製作・装着

無歯顎補綴領域を極める
豊富なバリエーションの402シリーズ

口腔内最大の補綴物、総義歯。その製作時には、口腔粘膜の形を機能的に捉え、適正な咬合高径や人工歯の排列位置などを見つけ出すため様々なテクニックが必要となります。
それらの修得の第一歩として、口腔粘膜の特性や種々の印象材の使用法、与える咬合様式などを理解

するため、基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。
402シリーズは、ソフト粘膜を付与した様々な印象採得法が行えるモデルから、人工歯排列などの技工作業が行える石こうモデルまで、実習目的に応じて様々なバリエーションの中から選択が可能です。



印象採得／G10シリーズ

G10シリーズは、ソフトタイプ粘膜を装着しハミューラノッチや口蓋小窩など印象採得時の目安となる形態的特長を有しています。また、シリコン印象材などが使用できるため、種々の印象材料を用いた概形印象や精密印象など、様々な印象採得法が可能です。さらに、KGP.6モデルでは筋圧形成が可能なよう、唇・頬粘膜を想定した立ち上がりを与えており、より臨床的な実習も可能です。



咬合採得／G2シリーズ、402Kモデル＋NAシリーズ

石こう模型のG2シリーズでは、規格化された模型上での咬合床の製作やゴシックアーチトレーサー装着などの技工実習が可能です。また、オプションのNシリーズ蟬堤と402Kモデルなどを組み合わせれば、マネキン実習での咬合平面の設定や垂直位および水平位などの咬合採得法を実習できます。



人工歯排列／G2シリーズ、NCシリーズ

石こう模型のG2シリーズや石こう模型と蟬堤がセットされたNCシリーズを用いれば、フルバランسدオクレーションやリンガライズドオクレーションなどの咬合様式下で色々な手法を用いた人工歯排列実習を行うことができます。また、その後の重合・研磨・選択割合など一連の技工実習も行うことができます。



G10-KGP.6



印象採得用顎模型 [G10-KGP.6]

ソフトタイプ粘膜を装着し、モデリングコンパウンドが使用可能な無歯顎模型。上顎小窩などの形態的特長を付与し、筋形成が可能なよう唇頬移行部から粘膜を立ち上げています。

ソフトタイプ粘膜	粘膜交換不可	咬合器装着不可
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着

概形印象	精密印象	筋圧形成	個人トレーの製作	咬合床製作	咬合採得	人工歯排列	義歯の重合	義歯の装着
------	------	------	----------	-------	------	-------	-------	-------



G10FE-402K



印象採得用顎模型 [G10FE-402K]

ソフトタイプ粘膜を装着し、各種印象材も使用可能な無歯顎模型。Nシリーズ蟬堤と組み合わせることで使用することによりマネキン実習での咬合採得実習も可能です。

バリエーション／標準価格

- G10D-402K (D咬合器つき)
- G10-402K (咬合器なし)

ソフトタイプ粘膜	粘膜交換不可	シリコン印象材使用可
シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着	

概形印象	精密印象	筋圧形成	個人トレーの製作	咬合床製作	咬合採得	人工歯排列	義歯の重合	義歯の装着
------	------	------	----------	-------	------	-------	-------	-------



NC-N4

蟬堤付き石こう製無歯顎模型 [NCシリーズ]

402モデルに合うNシリーズ蟬堤と石こう模型G2-402をセットした無歯顎模型。蟬堤のアーチや角度の異なる3種類の中から選択できます。

バリエーション／標準価格

- NC-N4
- NC-N6
- NC-N7

構成品

- 蟬堤 NA-各種
- 石こう製無歯顎模型 G2-402

石こう製モデル	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可 [※]
マグネットプレート非装着		

※オプションパーツによる

概形印象	精密印象	筋圧形成	個人トレーの製作	咬合床製作	咬合採得	人工歯排列	義歯の重合	義歯の装着
------	------	------	----------	-------	------	-------	-------	-------

●交換用パーツ



NA-N4

蟬堤 [NAシリーズ]


402モデルに装着可能な蟬堤。角度とアーチの異なる3種類の中から選択できます。

バリエーション／標準価格

- NA-N4
- NA-N6
- NA-N7

ワックス顎（蟬堤）形態一覧表

	上顎	下顎	アーチ
N4	80°	85°	標準
N6	75°	75°	標準
N7	75°	80°	スクエア

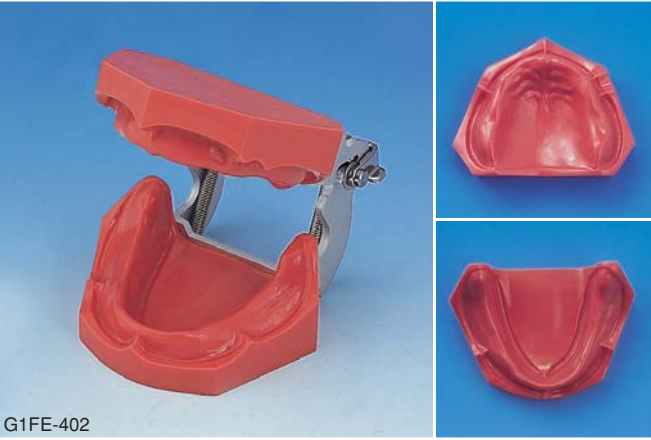

1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-402]

402Kモデルと形態が同じハードタイプ粘膜の無歯顎模型です。


ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可 [*]	マグネットプレート非装着
----------	--------------------------	--------------

※オプションパーツによる

■ バリエーション／標準価格

- G1D-402 (D咬合器つき)
- G1-402 (咬合器なし)

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

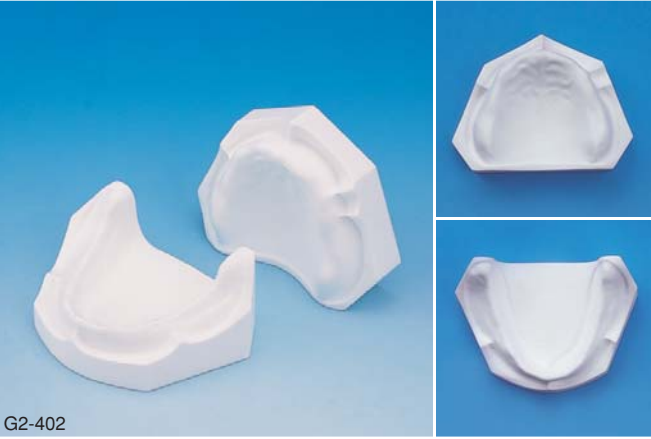

石こう製無歯顎模型 [G2-402]

402Kモデルと形態が同じ石こう製無歯顎模型です。個人トレーの製作や人工歯排列実習が可能です。石こうモデルのためFE咬合器などの装着はできません。

石こう製モデル	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可 [*]
マグネットプレート非装着		

※オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



石こう模型用陰型（無歯顎） [H3-402]

402Kモデルと同形態の無歯顎石こう模型製作用のゴム枠です。販売は、片顎ずつとなります。

石こうモデル用ゴム枠		
------------	--	--

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Others その他のモデル



ベースプレート咬合堤つき石こう製無歯顎模型 [ND-N8]

402モデルと形態の異なる石こう模型G2-402Fモデルにベースプレートを付与し、咬合堤をセットした無歯顎模型です。

■ 構成品

- ベースプレートつき咬合堤 NB-N8
- 石こう製無歯顎模型 G2-402F

■ 交換用モデル

- 石こう製無歯顎模型 G2-402F
- ベースプレートのみ NE-N8
- ベースプレートつき咬合堤 NB-N8

石こう製モデル	ベースプレートつき咬合堤	咬合器装着不可
シンプルマネキン装着可 [*]	マグネットプレート非装着	

※オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-402F]

ND-N8モデルに付属している402Fモデルと形態が同じハードタイプ粘膜の無歯顎模型です。

■ バリエーション／標準価格

- G1D-402F (D咬合器つき)
- G1-402F (咬合器なし)

ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可 [*]	マグネットプレート非装着
----------	--------------------------	--------------

※オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



1色レジン製無歯顎模型 [G1FE-405]

補綴修復用有歯顎モデル500Aシリーズと合うアーチのレジン製無歯顎模型です。

■ バリエーション／標準価格

- G1D-405 (D咬合器つき)
- G1-405 (咬合器なし)

ハードタイプ粘膜	シンプルマネキン装着可 [*]	マグネットプレート非装着
----------	--------------------------	--------------

※オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



石こう製無歯顎模型 [G2-405]

405モデルと形態が同じ石こう製の無歯顎模型です。

石こう製モデル	咬合器装着不可	シンプルマネキン装着可 [*]
マグネットプレート非装着		

※オプションパーツによる

概形 印象	精密 印象	筋圧 形成	個人 トレーの 製作	咬合床 製作	咬合 採得	人工歯 排列	義歯の 重合	義歯の 装着
----------	----------	----------	------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

顎口腔機能領域を極める
顎機能頭蓋骨模型。

顎運動は、様々な補綴物を成功に導く上で理解しなくてはならない重要な要素です。
しかしながらその運動は、下顎頭や歯列の関係で前後・左右・上下に複雑に絡み合う動きのため、イラストのようなものでは2次元的な動きを一つ一つ断片的に表しているため、なかなか理解しづらいものでした。

顎口腔機能学モデルでは、頭蓋骨モデルを基本に、それらの動きをより分かりやすく理解できるよう、3次元的な動きで顎運動を再現できるようになっています。



P10-SB.20



顎機能頭蓋骨模型 [P10-SB.20]

前方位、側方位、最大開口位など様々な動く下顎運動を3次元的な動きで再現できる頭蓋骨モデル。
より滑らかに3次元的な下顎運動ができるよう、側頭筋、咬筋を想定した4本のシリンダーを頭蓋骨モデルに付与しています。また、再現できる咬合様式は犬歯誘導とし、軽く力を加えることで複雑に動く下顎運動を観察することができます。
切歯点や下顎頭の動きを3次元的に観察することで、今までイラスト的に理解していた下顎運動をより分かりやすく理解することができます。

■中心位



■咬頭嵌合位



■側方位



■前方位



■最大開口位



保存分野

Restorative Dentistry



保存修復領域	P40
・実習用基本モデル	P41
・交換用模型歯・オプション模型歯	P42
・その他の交換用パーツ・オプションパーツ	P44
・その他のモデル	P44




歯内療法領域	P46
・Sシリーズモデル	P47
・Aシリーズ模型歯	P48
・Bシリーズ模型歯	P49
・その他のモデル	P50

保存修復領域を極める
豊富なバリエーションの500Eシリーズ

症例によって選択される様々な保存修復物。それらをより早く正確に施術するためには様々なテクニックが必要となります。それらの修得の第一歩には窩洞形成時のハンドリングやラバーダムシートなどの使い方を理解するため、基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。

500Eシリーズは、保存治療のテクニック修得に不可欠な形成時の切削性やラバーダムが装着できる機能を備え、実習目的に応じて様々なバリエーションの中から選択が可能です。また、豊富なオプション模型歯と組み合わせることで、より実践的なテクニックへステップアップが可能です。

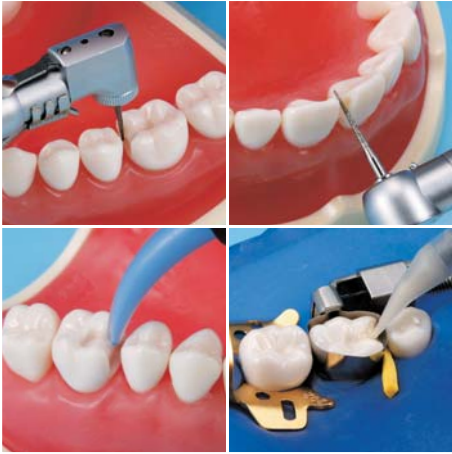

窩洞形成／500Eシリーズ全て

切削感を体感しながら様々な形成方法が修得できるよう、タービンやコントラでの形成に適した切削性を備えた模型歯を全てのシリーズに装着。また、顎模型の形状も前歯歯頸部の窩洞形成時に無理のないよう唇頬移行部までの形状が広がっています。模型歯は、実習時に動きにくく、かつ簡単に交換できるようにネジで顎模型に固定されています。



ラバーダム防湿／500Eシリーズ全て

ラバーダムクランプが装着しやすいよう歯肉を少し下げ、歯冠部を少し露出させています。また、マトリックスバンドやウエッジが装着しやすいよう鼓形空隙も少し広くしています。



印象採得／500Eシリーズ全て

歯肉粘膜は、ソフトタイプとハードタイプのモデルがあり、ソフトタイプ粘膜を装着したD18タイプやD16シリーズでは歯肉圧排から印象採得までの一貫した実習が可能です。またD18タイプでは、シリコン印象材を用いた精密印象採得も可能です。



オプション模型歯でさらに広がる実習用途

より実践的な窩洞形成／A20A、A22A、A55A



模型歯をより切削性に優れたA20シリーズや髓室が付与されたA22シリーズ、楔状欠損が表現されたA55シリーズなどと組み替えることにより、歯質の削除量を勘案したより臨床的な実習が可能です。→P42

充填材料の填塞／A55A、A50A




窩洞形成を施した模型歯はもちろん、予め窩洞形成されたA55・A50シリーズと組み合わせることにより各種充填材料やマトリックスバンドなどを用いた修復実習が可能です。→P43

ミニマルインターベーション／A26A



様々な蝕を想定したA26シリーズに組み替えることにより、軟化象牙質の除去や感染歯質の削除量も勘案した、より実践的な実習が可能です。→P43


歯内療法／S12A、A22A

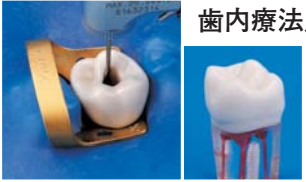

髓室や根管が付与されたS12やA22シリーズと組み替えることにより、天蓋除去や根管拡大時などの感覚を体感しながら根管充填までの一連の流れを実習することができます。→P42



D18FE-500E

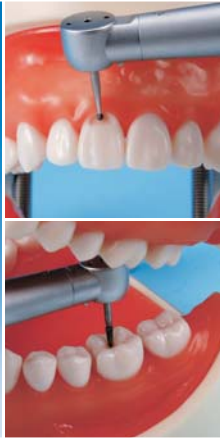

保存修復用顎模型 [D18FE-500E]

ソフトタイプ粘膜を装着し、窩洞形成から充填材料の填塞までの総合的な実習が可能な顎模型。シリコン印象材を用いた精密印象採得も可能です。

バリエーション／標準価格
●D18D-500E (D咬合器つき) ●D18-500E (咬合器なし)

構成品
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D18-500E用粘膜 500E-F-GUB
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着可

窩洞形成	ラバーダム装着	充填材料の填塞	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	修復物の製作・装着	フッ化物歯面塗布
------	---------	---------	------	------------	--------	-----------	----------



D16FE-500E ピンク (GSF)



保存修復用顎模型 [D16FE-500E (GSF)]

ピンク色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。D18モデルより伸びの良い材質のため、歯肉圧排糸が挿入しやすくなっています。

バリエーション／標準価格
●D16D-500E (GSF) (D咬合器つき) ●D16-500E (GSF) (咬合器なし)

構成品
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500E用粘膜 (ピンク色) 500E-F-GSF
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着可

窩洞形成	ラバーダム装着	充填材料の填塞	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	修復物の製作・装着	フッ化物歯面塗布
------	---------	---------	------	------------	--------	-----------	----------



D16FE-500E クリアピンク (GSE)



保存修復用顎模型 [D16FE-500E (GSE)]

クリアピンク色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。半透明粘膜のため、歯肉縁下のマージンや歯肉圧排糸などが粘膜を通じて確認することができます。

バリエーション／標準価格
●D16D-500E (GSE) (D咬合器つき) ●D16-500E (GSE) (咬合器なし)

構成品
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500E用粘膜 (クリアピンク色) 500E-F-GSE
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着可

窩洞形成	ラバーダム装着	充填材料の填塞	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	修復物の製作・装着	フッ化物歯面塗布
------	---------	---------	------	------------	--------	-----------	----------



D16FE-500E クリア (GSD)



保存修復用顎模型 [D16FE-500E (GSD)]

クリア色のソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。透明粘膜のため、歯肉縁下のマージンや歯肉圧排糸が500Eシリーズ中、最も見やすくなっています。

バリエーション／標準価格
●D16D-500E (GSD) (D咬合器つき) ●D16-500E (GSD) (咬合器なし)

構成品
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●D16-500E用粘膜 (クリア色) 500E-F-GSD
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着可

窩洞形成	ラバーダム装着	充填材料の填塞	歯肉圧排	アルジネート連合印象	シリコン印象	修復物の製作・装着	フッ化物歯面塗布
------	---------	---------	------	------------	--------	-----------	----------



D51FE-500E

2色レジン製顎模型 [D51FE-500E]

形成実習に特化させたハードタイプ粘膜の顎模型。
ハード粘膜のため、印象採得は行えますが歯肉圧排などの歯肉縁下に至る実習はできません。

- バリエーション／標準価格
- D51D-500E (D咬合器つき) ●D51-500E (咬合器なし)

- 構成品
- 単根模型歯 永久歯 A5A-500

□部位 28歯		
模型歯交換可	模型歯ネジ止め固定	ハードタイプ粘膜
粘膜部交換不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着可

窩洞形成

ラバーダム装着

充填材料の填塞

歯肉圧排

アルジネート連合印象

シリコン印象

修復物の製作・装着

フッ化物歯面塗布

●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 永久歯 [A5A-500]

顎模型500Eシリーズに予め装着されている模型歯。歯冠部は解剖学的形態を採用しています。

□部位 28歯

- バリエーション／標準価格

- セット

窩洞形成



切削用模型歯 [A20A-500]

エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。A5模型歯より切削感を天然歯に近づけています。


□部位 7654321 1234567

76543 34567 の24部位

- バリエーション／標準価格

- セット

窩洞形成

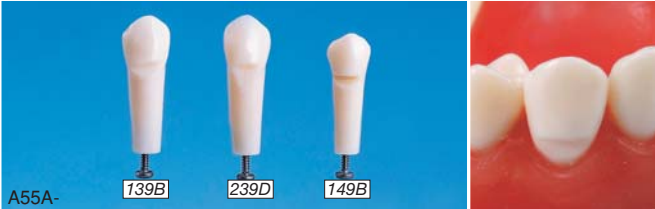

楔状欠損模型歯 [A55A-139B, 149B, 239D]

楔状欠損を想定したW.S.D窩洞形成実習用模型歯です。

□部位 3) A55A-139B 3) A55A-239B 4) A55A-149B

窩洞形成



【特注品】カリエス模型歯 [A26Aシリーズ]

切削性に優れたA20模型歯にカリエスを付与した模型歯。感染歯質の削除を助案したより臨床に近い実習が可能です。

※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

窩洞形成

軟化象牙質の除去



歯内療法用模型歯 [A22A-500]

切削性に優れたA20模型歯に髄室・根管を付与し髄壁を赤く染色させた模型歯。根管拡大や歯質の削除量を助案したより臨床に近い形成実習が可能です。

□部位 6 4 1 1 4 6
65 56 の10部位*

※申し訳ありませんが、前歯部や下顎小白歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のものをご使用ください。

- バリエーション／標準価格

- セット

- ネジなし仕様 A22-500

髄室開孔

根管拡大

根管充填

窩洞形成



歯内療法用模型歯 [S12A-500]

髄室・根管を付与し髄壁を赤く染色させた模型歯。歯根部は形成状態などの確認が行いやすいように透明になっています。歯冠部はA5模型歯より軟らかい材料で作られています。

□部位 6 4 1 1 4 6
65 56 の10部位*

※申し訳ありませんが、前歯部や下顎小白歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のものをご使用ください。

- バリエーション／標準価格

- セット

- ネジなし仕様 S12-500

髄室開孔

根管拡大

根管充填



A50A-各種

窩洞形成模型歯 [A55A/A50Aシリーズ]

A5模型歯をベースに様々な窩洞形成が施されています。

□部位 下記の一覧表を参照してください。

充填材料の填塞

印象採得

修復物の製作・装着



A5SA-500

切削評価用模型歯 [A5SA-500]

A5模型歯の切削性はそのままに表面をつや消し状態にした評価用模型歯。レーザーでの形状計測が可能です。

□部位 6 4 2 1 1 2 4 6
6 4 4 6 の12部位

窩洞形成

切削評価

A50A・A55A 支台・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.	形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.
1級窩洞	4	A55A-143 ㊦	4	A55A-243 ㊧	2級MOD窩洞	4	A50A-146 ㊧	4	A50A-246 ㊧
	5	A55A-153	5	—		5	A50A-156 ㊧	5	A50A-256 ㊧
	6	A55A-163 ㊦	6	A55A-263 ㊧		6	A50A-166 ㊧	6	A50A-266 ㊧
	7	—	7	A55A-273		7	—	7	A50A-276 ㊧
	4	—	4	A55A-343 ㊦		4	—	4	—
	5	A55A-453 ㊧	5	A55A-353 ㊧		5	A50A-456 ㊧	5	—
	6	A55A-463 ㊦	6	A55A-363 ㊧ ㊦		6	A50A-466 ㊧	6	A50A-366
	7	A55A-473 ㊦	7	A55A-373 ㊧		7	—	7	—
2級MO窩洞	4	A55A-144 ㊦	4	A55A-244 ㊦	2級OD窩洞	4	—	4	—
	5	A55A-154 ㊦	5	A55A-254 ㊦		5	—	5	—
	6	A55A-164 ㊧	6	A55A-264 ㊦		6	—	6	—
	7	A55A-174 ㊧	7	A55A-274 ㊧		7	—	7	—
	4	—	4	—		4	A55A-444 ㊧	4	—
	5	—	5	A55A-354 ㊧		5	A55A-454 ㊧	5	—
	6	A55A-464 ㊧	6	A55A-364 ㊦		6	—	6	—
	7	A55A-474 ㊦	7	—		7	—	7	—
3級窩洞	1	A50A-113 ㊧	1	—	5級窩洞	1	A55A-115	1	A55A-215
	2	A50A-123 ㊦	2	A50A-223 ㊦		2	—	2	—
	3	—	3	—		3	A55A-135	3	A55A-235
	1	—	1	—		1	—	1	—
	2	—	2	—		2	—	2	—
	3	A50A-433	3	—		3	A55A-435	3	A55A-335
	1	A55A-114	1	A55A-214					
	2	A55A-124	2	A55A-224					
4級窩洞	3	—	3	—					

※その他の形成模型歯についてはP25をご覧ください。

※表中の記号 ㊦:メタル ㊦:アマルガム ㊦:レジン ㊦:複雑窩洞

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ



D18-500E用粘膜

■ 型番

- 500E-F-GUB



ピンク (GSF)



クリアピンク (GSE)



クリア (GSD)

D16-500E用粘膜

- 型番
- ピンク (500E-F-GSF)
 - クリアピンク (500E-F-GSE)
 - クリア (500E-F-GSD)



Z1 + D16FE-500H

舌模型 [Z-1]

舌排除の練習に使用する模型。ソフトタイプ粘膜が装着されたD18、D16タイプの模型に装着可能です。模型後部からクリップで固定します。



※顎模型は含まれません。

Others

その他のモデル



T1-PP (プリントつき)



T1-PP (プリントなし)

プレパレーションプレート [T1-PP (プリントつき)]

実習初期における基本的なタービンのもち方や動かし方などの修得のためのモデル。材質と色の異なる3層からなり切削中の感覚の違いと切削後の切削量が目視にて分かるようになっています。また、模型表面には咬合面のイラストがプリントされています。

- バリエーション／標準価格
- T1-PP (プリントなし)



B20-500



切削用複製根模型歯 [B20-500]

抜去歯の代替用に作られた天然歯根形態の模型歯。500Aシリーズのゴム陰型に植立できるよう歯冠部の形状はA5模型歯と同一とし、エナメル質には切削性に優れたA20模型歯と同じ材質を用いています。

□部位 76543 1 | 1234567
7654 | 3456 の21部位

窩洞形成



石こう模型用陰型 [H1-500Aシリーズ]

28ページに掲載されている顎模型500Aシリーズと同形態の石こう模型製作用のゴム枠です。

- 種類
- 上顎 H1-500AU
 - 下顎 H1-500AL



H1-500Aシリーズ

使用方法



気泡混入防止のためワックスパターン清掃材 (キャストメイト) を軽く噴霧します。



実習を行う部位の模型歯をゴム枠に植立します。



練和した石こうをゆっくりと流し込みます。



周りからエアーを静かにかけて模型を取り外します。



模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

保存用ゴム枠 (大)

抜去歯や複製根模型歯の形成実習の際、手に持ちやすくするための土台製作用ゴム陰型。サイズは、大と中の2種類あります。

- バリエーション／標準価格
- 保存用ゴム枠 (中)

- サイズ
- (大) W56×D40×H31 (mm)
 - (中) W45×D35×H35 (mm)



使用方法



気泡混入防止のためワックスパターン清掃材 (キャストメイト) を軽く噴霧します。




練和した石こうをゆっくりと流し込みます。



直ちに模型歯を植立させます。



周りからエアーを静かにかけて取り外します。

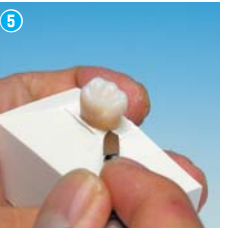


模型歯の周りに付着した石こうを除去します。

歯内療法領域を極める 豊富なバリエーションのエンドモデルシリーズ

歯内療法は見えない所を処置するため、なかなか理解しづらく処置しにくいものです。そのため適切に根管処理を行うには、根管形態を3次的にイメージしながら根管拡大などの処置を行い、その処置中には主根管部の分岐、癒合のタイプを確認しながら対処していく必要があります。

エンドモデルシリーズは、根管処置のテクニックをより早く、より簡単に修得できるよう目的やレベルに合わせて、様々なバリエーションがあります。それらのモデルを用いれば、天蓋除去や根管拡大時の感覚を体感しながらリーマーなどの器具の特性や様々な形成方法を理解することができます。

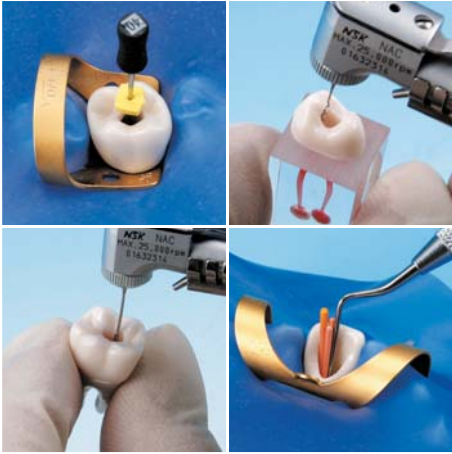

手に持って実習するタイプ／Sシリーズ

試験体タイプのSシリーズは、根管をイメージしやすいよう透明なブロックの中に様々な根管を表現したモデルです。根管のみを付与したモデルでは、根管形成時の感覚を体感しながら根管拡大から根管充填までの実習を行うことができます。また歯冠を付与したモデルでは、根管処置の基本的な術式を一連の流れの中で実習することができます。



模型に取り付けて実習するタイプ／Aシリーズ


単根模型歯タイプのAシリーズは、保存修復用顎模型500Eシリーズに装着しラバーダム装着から根管充填までの一連の流れを修得するためのモデルです。基本的な術式を実習できるように髓室と根管を付与した基本モデルのA12モデルから髓室開拓時の感覚をより分かりやすくしたA22モデルなど、色々なモデルの中から目的に応じた選択が可能です。



天然歯形態の模型歯で実習するタイプ／Bシリーズ

抜去歯の代替用として開発された天然歯根タイプのBシリーズは、各種根管長測定方法の修得や歯根と根管の関係を勘案した根管処理の感覚を養うためのモデルです。天然歯を想定した歯根とそれと相関関係を持った根管を付与した基本的なモデルから切削性の違いやX線造影性を付与したモデルなど色々なタイプがあります。

S series 手に持って実習するタイプ

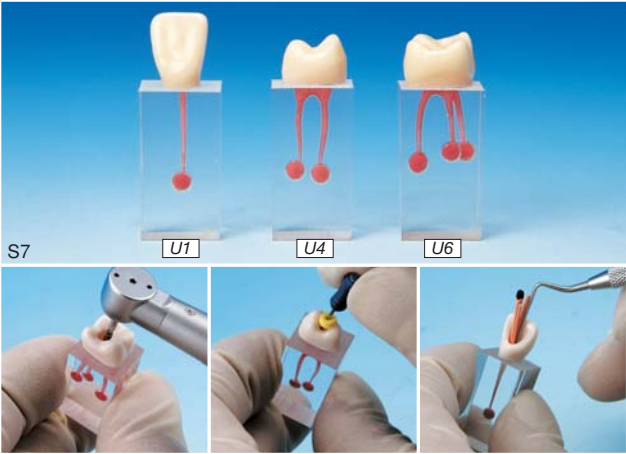


歯根管模型【S7シリーズ】

初期の髓室開孔・根管拡大・根管充填の実習のため、透明ブロックに歯冠、髓室、根管を付与したモデル。髓壁を赤く染めているため、リーマーやファイルの位置関係や根管形成の状態が目視にて確認しやすくなっています。また、根尖孔にシリコン球を付与し、穿孔時の感覚も分かるようになっています。

バリエーション			
●上顎中切歯	／S7-U1	●上顎第一大臼歯	／S7-U6
●上顎第一小臼歯	／S7-U4		
髓室開拓	根管長測定	根管拡大	根管充填

※術者の手指感覚による手法による


●模型バリエーション

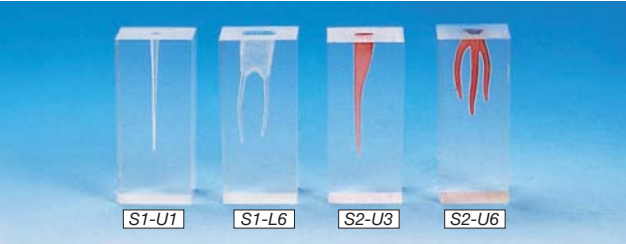

歯根管模型【S1（染色なし）、S2（染色あり）シリーズ】

透明ブロックの中に色々な部位の根管を付与したモデル。髓壁を赤く染色したものと、染色していないものの2種類あります。


バリエーション			
髓壁染色なし	●上顎中切歯／S1-U1	髓壁染色あり	●上顎中切歯／S2-U1
	●上顎犬歯／S1-U3		●上顎犬歯／S2-U3
	●上顎第一大臼歯／S1-U6		●上顎第一大臼歯／S2-U6
	●下顎第一大臼歯／S1-L6		●下顎第一大臼歯／S2-L6

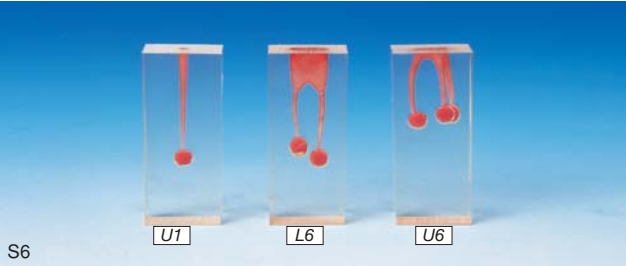

歯根管模型【S6シリーズ】

透明ブロックの中に各部位の根管を付与したモデル。根尖孔にシリコンを付与し、穿孔時の感覚が分かるようにしています。


バリエーション			
●上顎中切歯	／S6-U1	●下顎第一大臼歯	／S6-L6
●上顎第一大臼歯	／S6-U6		

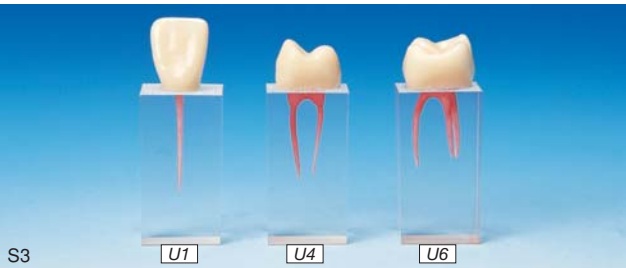

歯根管模型【S3シリーズ】

透明ブロックに歯冠と髓室、根管を付与したモデル。髓室開拓から根管拡大、根管充填の一連の実習が可能です


バリエーション			
●上顎中切歯	／S3-U1	●上顎第一大臼歯	／S3-U6
●上顎第一小臼歯	／S3-U4		

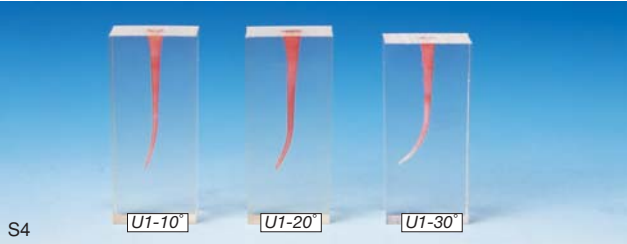

歯根管模型【S4シリーズ】

透明ブロックの中に中切歯を想定した湾曲度の異なる根管を付与したモデル。湾曲度は、10°、20°、30°の3種類あります。

バリエーション			
●10°湾曲	／S4-U1-10°	●30°湾曲	／S4-U1-30°
●20°湾曲	／S4-U1-20°		

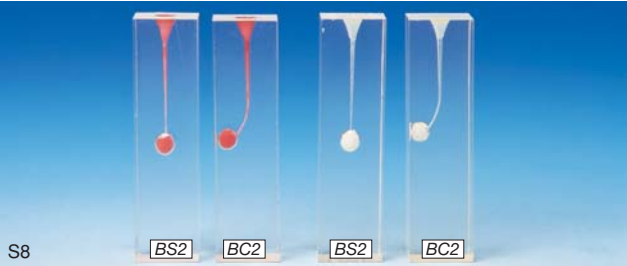

歯根管模型【S8シリーズ】

根管の太さをブローチの規格に準じて作られたモデル。根管の湾曲度の異なる2種類の中に髓壁の染色あり、なしのタイプのものがあります。

バリエーション			
根管湾曲 直	●S8-BS2-染色あり	根管湾曲 曲	●S8-BC2-染色あり
	●S8-BS2-染色なし		●S8-BC2-染色なし



髓腔模型歯 永久歯【S12-500】


500型模型歯をベースに髓室、根管を付与したモデル。歯根部は、形成状態などが確認しやすいように透明になっています。

□部位	6 4 1	1 4 6
	65	56

の10部位

A series

模型に取り付けて実習するタイプ

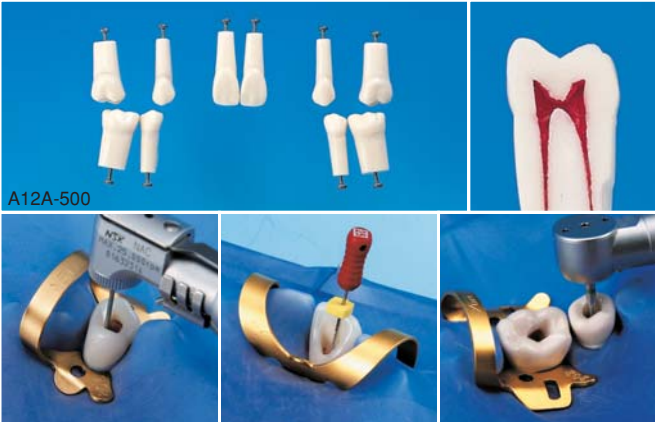

歯内療法用模型歯 [A12A-500]

単根模型歯A5A-500をベースに髄室と根管を付与した模型歯。髄壁を赤く染め根管拡大時などの形成状態を分かりやすくしています。また、41ページに記載されている500Eモデルと組み合わせることにより、髄室開拡やラバーダム装着、根管拡大や根管充填までの一連の流れの中で根管処理の感覚を養うことができます。

□部位 $\frac{641}{65} | \frac{146}{56}$ の10部位*

※申し訳ありませんが、前歯部や下顎小白歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のもをご使用ください。

バリエーション／標準価格

- セット ●ネジなし仕様 A12-500

髄室開拡 根管長測定 根管拡大 根管充填

※術者の手指感覚による手法による

●模型歯バリエーション



歯内療法用模型歯 [S12A-500]

髄室・根管を付与し根管を赤く染色させた模型歯。形成状態などが確認しやすいように歯根部を透明にしています。

□部位 $\frac{641}{65} | \frac{146}{56}$ の10部位*

※申し訳ありませんが、前歯部や下顎小白歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のもをご使用ください。

バリエーション／標準価格

- セット ●ネジなし仕様 S12-500

髄室開拡 根管長測定

根管拡大 根管充填

※術者の手指感覚による手法による



歯内療法用模型歯 [A22A-500]

エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせ、髄室・根管を付与した模型歯。髄室開拡時の感覚がより分かりやすくなっています。

□部位 $\frac{641}{65} | \frac{146}{56}$ の10部位*

※前歯部や下顎小白歯部では顎模型への固定の関係上根管にネジが貫通しています。申し訳ありませんが、実習に支障のある場合は、ネジなし仕様のもをご使用ください。

バリエーション／標準価格

- セット ●ネジなし仕様 A22-500

髄室開拡 根管長測定

根管拡大 根管充填

※術者の手指感覚による手法による



【特注品】歯内療法用模型歯 [A24Aシリーズ]

髄室開拡 抜髄

根管拡大 生活歯髄切断

切削性に優れたA22A模型歯をベースに歯髄を想定した軟質材料を付加したモデル。より臨床に近い実習が可能です。

※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

●関連商品



保存修復用顎模型 [D18FE-500E]

ソフトタイプ粘膜を装着し、ラバーダムランプなどの使用を想定したモデルです。

バリエーション／標準価格

- D18D-500E (D咬合器つき)
- D18-500E (咬合器なし)

ラバーダム装着 歯肉圧排 アルジネート連合印象 シリコン印象

※詳しくは、41ページを参照してください。



2色レジン製顎模型 [D51FE-500E]

D18モデルと形状が同じハード粘膜タイプの顎模型です。

バリエーション／標準価格

- D51D-500E (D咬合器つき)
- D51-500E (咬合器なし)

ラバーダム装着 歯肉圧排 アルジネート連合印象 シリコン印象

※詳しくは、41ページを参照してください。

B series

天然歯形状の模型歯で実習するタイプ



【特注品】複製根髄腔模型歯 [B22Xシリーズ]

抜去歯の代替用として開発されたX線造影性を備えた天然歯形態の模型歯。天然歯と同様にエナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせ、髄室と湾曲根管を付与しています。下記の顎模型と併用すれば、電気的根管測定方法や歯根と根管との相関関係を勘案したより実践的な根管処置の感覚を養うことができます。

※価格や特注可能な部位などについてはお問い合わせください。

髄室開拡 根管長測定 根管拡大 根管充填

※X線法による

●模型歯バリエーション



複製根髄腔模型歯 [B12-500]

B22モデルより軟かい材質を用いた一体型タイプの模型歯。髄室と湾曲根管を付与し、髄壁を赤く染色しています。

□部位 $\frac{21}{6} | \frac{16}{4}$ の6部位

髄室開拡 根管長測定

根管拡大 根管充填

※術者の手指感覚による手法による

●関連商品



根管長測定用顎模型 [D50-JC.22]

複製根タイプ模型歯で相対型電気的根管長測定方法による実習が可能なモデル。髄室開拡を施した複製根タイプ模型歯と導電性ペーストを併用して実習します。

根管長測定

※電気的根管長測定法による



導電性ペースト [NP-1]

根管長測定用モデル専用の導電性を有するペーストです。

容量 12g

根管長測定用模型の使用法



1 模型歯の髄室穿孔を行い、根管内を清掃します。



2 模型歯の根尖孔部に導電性ペーストを塗布・形成し、半日程度乾燥させます。



3 導電性ペーストを模型底部の金属板を完全に覆うように充填します。この時模型歯の根尖が埋まるように充填量を加減してください。



4 準備しておいた模型歯を顎模型に植立し、ユーティリティワックスにて固定します。



5 顎模型に付属しているケーブルを根管長測定器の対極と接続します。



6 ケーブルと顎模型を接続し、準備は完了です。




7 測定器の取扱説明書に従い、根管長を測定します。



保存用ゴム枠（大）
抜去歯や複製根模型歯での実習の際、手に持ちやすくするための土台製作用ゴム陰型です。
サイズは、大と中の2種類あります。

- バリエーション／標準価格
- 保存用ゴム枠（中）
- サイズ
- （大） W56×D40×H31（mm）
 - （中） W45×D35×H35（mm）
- ※使用方法は47ページを参照してください。

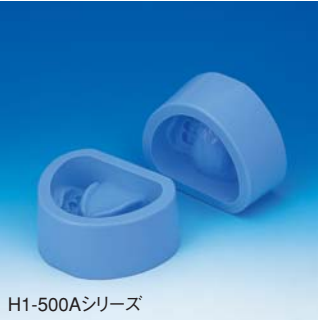

石こう模型用陰型
【H1-500Aシリーズ】
複製根模型歯を使用した石こう模型を製作するためのゴム枠です。28ページに掲載されている顎模型500Aシリーズと同形態になっています。

- 種類
- 上顎 H1-500AU
 - 下顎 H1-500AL
- ※販売は、片顎ずつとなります。
※使用方法は45ページを参照してください。

H1-500Aシリーズ

Others その他のモデル



P15FE-OOP.1

口腔外科用顎模型【P15FE-OOP.1】
天然歯形態の模型歯が植立され、注射針による刺入や切開縫合ができる粘膜が装着された外科用顎模型。外科的歯内療法実習を想定し、上顎右側中切歯では根尖病巣を付与し歯根端切除術が可能です。また、下顎右側切歯部では、膿症を付与しているため膿瘍切開実習も可能です。

- バリエーション／標準価格
- P15D-OOP.1（D咬合器つき）
 - P15-OOP.1（咬合器なし）

天然歯根模型歯装着	模型歯強粘着固定	模型歯・粘膜交換不可
切開・縫合用粘膜装着	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

- 歯根端切除
- 膿症切開
- 抜歯
- 骨隆起除去

※その他の実習可能な項目などについては、73ページを参照してください。

歯周、SRP分野
Preventive Dentistry



SRP領域
・500Hシリーズ
・206H.1シリーズ
・206H.2シリーズ
・DOT.2モデル
・X.770モデル

P52
P53
P56
P56
P60
P62



歯周外科領域
・004モデル
・901Cモデル
・その他のモデル

P64
P65
P66
P67




プラークコントロール領域

P68

スケーリング、ルートプレーニング領域を極める豊富なバリエーションのSRPモデルシリーズ

様々な症状や処置を施す部位などによって色々なインストルメンテーションが必要となる歯周処置。適切な処置を施すためには、歯周組織の状態を理解し歯根などの形状を3次元的にイメージしながらアプローチすることが必要となります。SRPモデルシリーズは、歯根の形状や歯肉・歯槽骨の状態を変化させた豊富なバリエーションの中

から実習目的やレベルに合わせた選択が可能です。これらのモデルに人工的な歯石を付着させて実習することで、器具から伝わる感覚を繰り返し体感しながらブローピング、エキスブローピング、スケーリングなどのテクニックをより早く修得することができます。

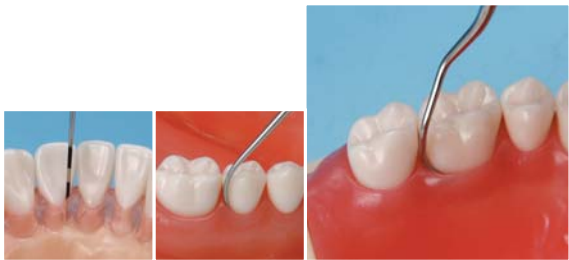


正常な状態の単純歯根モデル／500Hシリーズ

500Hシリーズは、実習初期時の器具の持ち方や挿入方法などの基礎的なテクニックを理解し修得するため、正常な歯肉と歯槽骨の状態を想定したモデルです。ソフトタイプ粘膜と単純歯根形状の模型歯を装着し、オプションの歯石セットと組み合わせることで、歯石探査や歯石除去の基礎的な感覚を養うことができます。



分岐部欠損がある単純歯根モデル／206Hシリーズ

206Hシリーズは、大白歯部に根分岐模型歯を装着し、500Hモデルではできなかった根分岐部への実習が可能なモデルです。歯肉縁下の実習が可能なよう歯槽骨には、水平吸収に加え分岐部欠損や裂開性骨欠損などの垂直吸収も付与しています。歯肉の状態が正常な206H.2モデルと病変状態を想定した206H.1モデルの2種類あり目的に応じて選択が可能です。

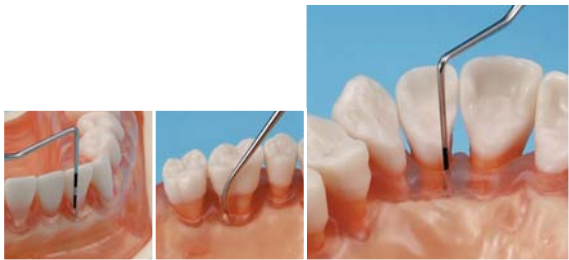

病変状態と正常状態が混合した解剖学的歯根モデル／DOT.2モデル

DOT.2モデルは、解剖学的歯根形状の模型歯を装着し左側を病変状態に、右側を正常状態にしたモデルです。病変部位では、水平吸収を与え骨欠損と歯根形状を意識した実習が、正常部位では器具の持ち方などの基礎的な実習を行うことができます。また、オプションの模型歯と差し替えれば、分岐部病変を想定した実習も可能です。



分岐部欠損など様々な病変と不正歯列を付与した解剖学的歯根モデル／X.770モデル

X.770モデルは様々な歯周病変を付与し、より臨床的な実習が可能なモデルです。分岐部病変の進行度合いや複数根を意識した実習が可能なよう、歯根を分岐した模型歯を装着し、裂開性欠損や4壁性欠損など様々な骨欠損のパターンも付与しています。また不正歯列や智歯なども付与し、より実践的なスケーリング実習なども可能です。

500H series

正常な状態の単純歯根モデル



D16FE-500H ピンク (GSF)

SRP用顎模型 [D16FE-500H (GSF) -QF]

ブローピングからスケーリングまでの初期の実習を想定し、正常な歯肉・歯槽骨の状態を付与した顎模型。ソフトタイプ粘膜を装着しているため、歯肉の抵抗感を体感しながら器具の挿入方法や力加減、ストローク方法などの基礎的なテクニックを修得することができます。また単純化した歯根形状の模型歯を装着し、スケーリング時のスケーラーの刃部と歯の角度との関係もより分かりやすくなっています。

バリエーション／標準価格
●D16D-500H(GSF) (D咬合器つき) ●D16-500H(GSF) (咬合器なし)

構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●500H用粘膜 (ピンク色) 500H-F-GSF
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
正常歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※歯石セットなどと組み合わせて実習する場合

●模型バリエーション



D16FE-500H クリアピンク (GSE)

SRP用顎模型 [D16FE-500H (GSE) -QF]

500Hピンク色モデルの粘膜色をクリアピンク色にした顎模型。粘膜が半透明色のため、歯肉縁下の状態が分かりやすくなっています。

バリエーション／標準価格
●D16D-500H(GSE) (D咬合器つき) ●D16-500H(GSE) (咬合器なし)

構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●500H用粘膜 (クリアピンク色) 500H-F-GSE
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
正常歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※歯石セットなどと組み合わせて実習する場合



D16FE-500H クリア (GSD)

SRP用顎模型 [D16FE-500H (GSD) -QF]

500Hピンク色モデルの粘膜色をクリア色にした顎模型。粘膜が透明色のため、歯肉縁下の状態が最も見やすくなっています。

バリエーション／標準価格
●D16D-500H(GSD) (D咬合器つき) ●D16-500H(GSD) (咬合器なし)

構成
●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●500H用粘膜 (クリア色) 500H-F-GSD
□部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
正常歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※歯石セットなどと組み合わせて実習する場合


●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 永久歯 [A5A-500]
顎模型500Hシリーズに予め装着されている模型歯。歯根形状を単純化しています。
□部位 28歯
■バリエーション／標準価格
●セット



2色単根模型歯 [A13A-500]
歯冠部と歯根部の色に変化を持たせ境界を分かりやすくした模型歯。A5模型歯より軟かい材質で作られています。
□部位 7654321 | 1234567
76543 | 34567 の24部位
■バリエーション／標準価格
●セット

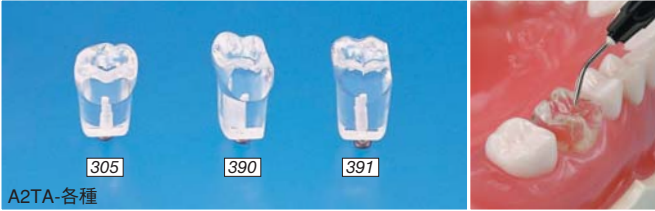

シーラント用模型歯 [A2TA-305, 390, 391]
模型歯全体を透明にしたシーラント用模型歯。本体が透明のため充填材の充填状態が確認しやすくなっています。
□部位・型番
7 A2TA-305 6 A2TA-390 6 A2TA-391



支台・窩洞形成模型歯 [A55A/A50Aシリーズ]
A5模型歯をベースに様々な形成が施されています。
□部位 23ページの一覧表を参照してください。
※申し訳ありませんが、ポストコアは、その形成の形態の関係上、固定用のネジはつきません。そのため、模型への装着方法はユーティリティワックスなどで仮着してご使用ください。
■型番／標準価格
●ポストコアのみ（ネジなし） A50-〇〇

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ



500H用粘膜
■型番
●ピンク (500H-F-GSF)
●クリアピンク (500H-F-GSE)
●クリア (500H-F-GSD)



シリコン印象用粘膜 [500H-F-GUB]
シリコン印象材の使用が可能で正常状態の交換用粘膜です。予めこの粘膜が装着されたモデルもあります。
■バリエーション／標準価格
●D18FE-500H (FE咬合器つき)
●D18D-500H (D咬合器つき)
●D18-500H (咬合器なし)



●オプション



歯石セット
模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。濃いグレー色と歯石に近似した色の2色がセットされています。
■セット内容
粉末A（歯石近似色）8g、粉末B（濃いグレー色）8g、液材 25mL、筆2本、ダッピンググラス2個、サンドペーパー
■別売品
●粉末A（歯石近似色）8g
●粉末B（濃いグレー色）8g
●液 25mL
●筆 2本
●ダッピンググラス 1個



人工歯石
マニキュアタイプの人工的な歯石。1液性タイプのためスティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。
■セット内容
人工歯石 6g、うすめ液 5mL、スティック 1本
■別売品
●うすめ液 5mL



人工プラーク
ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後の残留状態が分かりやすくなっています。
■容量
8mL

206H.1 series 分岐部欠損がある単純歯根モデル 病変タイプ



P15FE-206H.1 ピンク (GSF)

SRP用顎模型 [P15FE-206H.1 (GSF) -MF]

歯周疾患の基本テクニックを修得するため、500Hモデルをベースに歯肉や歯槽骨に病変状態を付与した顎模型。

歯肉縁下へのブローピングやルートプレーニングが可能なよう、歯槽骨全体に水平吸収を施し、犬歯部には裂開性骨欠損を第一大臼歯部にはヘミセプターなどの骨欠損を付与しています。また第一大臼歯部には根分岐模型歯を装着しており、分岐部病変を想定した実習が可能です。歯肉部は、球根状や退縮などの病変状態を付与し、病変歯肉へのブラークコントロール実習も可能です。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.1 (GSF) (D咬合器つき) ●P15-206H.1 (GSF) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- 206H.1用粘膜 (ピンク色) 206H.1-F-GSF

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	病変ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合

●模型バリエーション



P15FE-206H.1 クリアピンク (GSE)

SRP用顎模型 [P15FE-206H.1 (GSE) -MF]

206H.1ピンク色の粘膜色をクリアピンク色にした顎模型。粘膜が半透明色のため、歯肉縁下の状態が分かりやすくなっています。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.1 (GSE) (D咬合器つき) ●P15-206H.1 (GSE) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- 206H.1用粘膜 (クリアピンク色) 206H.1-F-GSE

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	病変ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合

SRP用顎模型 [P15FE-206H.1 (GSD) -MF]

206H.1ピンク色の粘膜色をクリア色にした顎模型。粘膜が透明色のため、歯肉縁下の状態が最も見やすくなっています。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.1 (GSD) (D咬合器つき) ●P15-206H.1 (GSD) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- 206H.1用粘膜 (クリア色) 206H.1-F-GSD

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	病変ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合



P15FE-206H.1 クリア (GSD)

206H.2 series 分岐部欠損がある単純歯根モデル 正常タイプ



P15FE-206H.2 ピンク (GSF)

SRP用顎模型 [P15FE-206H.2 (GSF) -MF]

206H.1モデルの歯槽骨部にピンク色の正常状態の粘膜を装着した顎模型。スケーラーなどの器具の挿入方向やストロークの方法などがより分かりやすくなっています。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.2 (GSF) (D咬合器つき) ●P15-206H.2 (GSF) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- P15-206H.2用粘膜 (ピンク色) 500H-F-GSF

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合



P15FE-206H.2 クリアピンク (GSE)

SRP用顎模型 [P15FE-206H.2 (GSE) -MF]

206H.2ピンク色モデルの粘膜色を透明ピンク色にした顎模型です。粘膜が半透明色のため、歯肉縁下の状態が分かりやすくなっています。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.2 (GSE) (D咬合器つき) ●P15-206H.2 (GSE) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- P16-206H.2用粘膜 (クリアピンク色) 500H-F-GSE

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合



P15FE-206H.2 クリア (GSD)

SRP用顎模型 [P15FE-206H.2 (GSD) -MF]

206H.2ピンク色モデルの粘膜色を透明色にした顎模型。粘膜が透明色のため、歯肉縁下の状態が最も見やすくなっています。

- バリエーション／標準価格

●P15D-206H.2 (GSD) (D咬合器つき) ●P15-206H.2 (GSD) (咬合器なし)
- 構成品

●単根模型歯 永久歯 A5A-500 ●根分岐模型歯 A2A-233
□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位
7 54321 | 12345 7 の24部位
- P16-206H.2用粘膜 (クリア色) 500H-F-GSD

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	正常ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工ブラークなどと組み合わせて実習する場合

●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 永久歯 [A5A-500]

顎模型206Hシリーズに予め装着されている模型歯。歯根形状を単純化しています。

□部位 7 54321 | 12345 7 □部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の24部位



根分岐模型歯 [A2A-233]

顎模型206Hシリーズに予め装着されている根分岐部を付与した模型歯です。A5A模型歯より軟らかい材料で作られています。

□部位 $\frac{6}{6} | \frac{6}{6}$ の4部位





A13A-500 2色単根模型歯【A13A-500】

歯冠部と歯根部の色に変化を持たせ境界を分かりやすくした模型歯。A5模型歯より軟かい材質で作られています。

□部位

7 54321	12345
7 543	345 7

 の20部位

エクス
ポージング

スケーリング



支台・窩洞形成模型歯【A55A/A50Aシリーズ】

A5模型歯をベースに様々な形成が施されています。第一大臼歯以外の部位に装着できます。

□部位 23ページの一覧表を参照してください。

※申し訳ありませんが、ポストコアーは、その形成の形態の関係上、固定用のネジはつきません。そのため、模型への装着方法はユーティリティワックスなどで仮着してご使用ください。

■ 型番／標準価格

●ポストコアーのみ A50-〇〇

充填材料
填塞

印象
採得

修復物の
製作・装着

A2A 支台・窩洞形成模型歯一覧表

形 態	部位	注文 No.	部位	注文 No.	形 態	部位	注文 No.	部位	注文 No.
フルキャストクラウン	<u>6</u>	A2A-287	<u>6</u>	—	1級窩洞	<u>6</u>	—	<u>6</u>	—
	<u>6</u>	A2A-266	<u>6</u>	—		<u>6</u>	A2A-267	<u>6</u>	A2A-248
1級複雑窩洞	<u>6</u>	—	<u>6</u>	—	2級窩洞	<u>6</u>	—	<u>6</u>	A2A-321
	<u>6</u>	—	<u>6</u>	A2A-359		<u>6</u>	A2A-249	<u>6</u>	—
2級MO窩洞	<u>6</u>	—	<u>6</u>	—	2級MOD窩洞	<u>6</u>	—	<u>6</u>	—
	<u>6</u>	A2A-355	<u>6</u>	A2A-265		<u>6</u>	—	<u>6</u>	A2A-288
ポストコアー	<u>6</u>	A2A-299	<u>6</u>	—					
	<u>6</u>	—	<u>6</u>	—					

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ



206H.1用病変粘膜

206H.1に予め装着されている病変タイプの粘膜です。

■ 型番

- ピンク (206H.1-F-GSF)
- クリアピンク (206H.1-F-GSE)
- クリア (206H.1-F-GSD)



シーラント用模型歯【A2TA-305】 【A2TA-378】

模型歯全体を透明にしたシーラント用模型歯。本体が透明のため充填材の填塞状態が確認しやすくなっています。

□部位

7 A2TA-305	6 A2TA-378
------------	------------

予防
填塞



支台・窩洞形成模型歯【A2Aシリーズ】

模型歯A2A-233をベースに様々な形成が施された模型歯。第一大臼歯部に装着できます。

□部位・形態 下記の一覧表を参照してください。

充填材料
填塞

印象
採得

補綴物
装着



206H.2用正常粘膜

206H.2に予め装着されている正常タイプの粘膜です。

■ 型番

- ピンク (500H-F-GSF)
- クリアピンク (500H-F-GSE)
- クリア (500H-F-GSD)



シリコン印象用粘膜【500H-F-GUB】

シリコン印象材の使用が可能な206H.2モデルと形態が同じ正常タイプの粘膜です。



舌模型【Z-1】

舌排除の練習に使用する模型。模型後部からクリップで固定します。

※顎模型は含まれません。

●オプション



歯石セット

模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。濃いグレー色と歯石に近似した色の2色がセットされています。

■ セット内容

粉末A（歯石近似色）8g、粉末B（濃いグレー色）8g、液材 25mL、筆2本、ダッピンググラス2個、サンドペーパー

■ 別売品

- 粉末A（歯石近似色）8g
- 粉末B（濃いグレー色）8g
- 液 25mL
- 筆 2本
- ダッピンググラス 1個

エクス
ポージング

スケーリング

ルート
プレーニング

人工歯石

マニキュアタイプの人工的な歯石。1液性タイプのためスティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。

■ セット内容

人工歯石 6g、うすめ液 5mL、スティック 1本

■ 別売品

- うすめ液 5mL

エクス
ポージング

スケーリング

ルート
プレーニング



人工ブラーク

ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後の残留状態が分かりやすくなっています。

■ 容量

8mL

ブラッシング

ルート
プレーニング

DOT.2 series

病変状態と正常状態が混合した解剖学的歯根モデル



SRP用顎模型 [P15FE-DOT.2]

右側を病変状態に左側を正常な状態にした混合タイプの顎模型。歯根形態を意識した実習が可能なよう、歯根1/3程度まで解剖学的形態をした模型歯が装着されています。正常状態の左側部位では、基礎的な器具の持ち方や挿入方法などの実習ができます。また、病変状態の右側部位では歯槽骨の水平吸収や歯肉退縮を付与しているため、骨欠損を意識したプロービングやルートプレーニング実習が可能です。さらに、オプション模型歯に差し替えば、根分岐部への実習や隣接面下の器具の使い方などをより分かりやすく実習することができます。

- バリエーション／標準価格
- P15D-DOT.2 (D咬合器つき) •P15-DOT.2 (咬合器なし)

- 構成
- 解剖学的単根模型歯 B1A-DOT.2 No.2 •DOT.2用粘膜 DOT.2-F-GSE
- 部位 28歯

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	混合ソフトタイプ粘膜
混合状態歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合
※2 人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

●模型歯バリエーション



解剖学的単根模型歯 [B1A-DOT.2 No.2]

DOT.2モデルに予め装着されている模型歯。歯根形状は、1/3程度まで解剖学的な形態をしています。
□部位 28歯


- バリエーション／標準価格
- セット



隣接面カット模型歯 [B1A-DOT.2 No.1]


歯冠隣接面を削除した模型歯。歯根隣接面のスクレーラーの挿入方法やストローク方法などがより理解しやすい形状になっています。
□部位 28歯

- バリエーション／標準価格
- セット

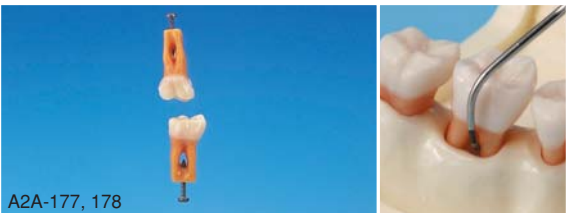

根分岐模型歯 [A2A-177, 178]

DOT.2 No.2模型歯をベースに根分岐を付与した模型歯。根分岐病変を想定した実習が可能です。
□部位 6J A2A-177 6J A2A-178

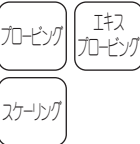

支台・窩洞形成模型歯 [A70A] [A7A]

B1模型歯をベースに様々な形成が施された模型歯です。
□部位 下記の一覧表を参照してください。



A70A / A7A 支台・窩洞形成模型歯一覧表

形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.	形態	部位	注文 No.	部位	注文 No.
1級窩洞	5	A70A-70	5	—	2級窩洞	6	—	6	A70A-72
	6	A70A-73	6	A70A-135		7	—	7	—
3級窩洞	2	A70A-127	2	A70A-100		6	A70A-114	6	A70A-130
5級窩洞	1	A70A-71	1	—		7	—	7	A70A-128
	2	—	2	—	ジャケットクラウン	1	—	1	A70A-119
	3	A70A-890	3	—		2	—	2	A7A-914
フェーシングクラウン	1	—	1	A7A-913		3	—	3	A70A-129
フルキャストクラウン	6	A70A-120	6	—		6	A70A-131	6	—

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ



DOT.2用粘膜 [DOT.2-F-GSE]

●オプション



歯石セット

人工歯石

模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。濃いグレー色と歯石に近似した色の2色がセットされています。

- セット内容
- 粉末A (歯石近似色) 8g、粉末B (濃いグレー色) 8g、液材 25mL、筆2本、ダッピンググラス2個、サンドペーパー

- 別売品
- 粉末A (歯石近似色) 8g
- 粉末B (濃いグレー色) 8g
- 液 25mL
- 筆 2本
- ダッピンググラス 1個



舌模型 [Z-1]

舌排除の練習に使用する模型。模型後部からクリップで固定します。



※顎模型は含まれません。



人工歯石

人工歯石

マニキュアタイプの人工的な歯石。1液性タイプのためスティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。

- セット内容
- 人工歯石 6g、うすめ液 5mL、スティック 1本
- 別売品
- うすめ液 5mL



人工プラーク

人工プラーク

ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後の残留状態が分かりやすくなっています。

- 容量
- 8mL



X.770 series 分岐部欠損など様々な病変と不正歯列を付与した解剖学的歯根モデル



SRP用顎模型 [P15FE-X.770]

より臨床的なテクニック修得のため、様々な歯周病を想定した病変状態へのアプローチ方法を実習できる顎模型。歯列は、転位や傾斜などの不正歯列や智歯を付与しているため、より臨床的なプロービングやスケーリングテクニックを実習することができます。また、分岐部病変の進行度合いや骨欠損を意識したプロービング、ルートプレーニングを行えるよう、骨欠損のパターンは裂開性の欠損やⅠ壁性からⅣ壁性までの形態を付与し、根分岐部病変もⅠ度～Ⅲ度までを想定した状態を付与しています。

- バリエーション／標準価格
- P15D-X.770 (D咬合器つき)
 - P15-X.770 (咬合器なし)
- 構成品
- 解剖学的単根模型歯 B1A-004
 - 解剖学的単根模型歯 A2A-X.770
- 部位 $\frac{7\ 5\ 321}{543\ 1}$ | $\frac{123\ 5\ 7}{1\ 345}$ の18部位
- 部位 $\frac{6\ 4}{76\ 2}$ | $\frac{4\ 6}{2\ 678}$ の11部位
- X.770用粘膜 X.770-F-GSE

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	病変ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート非装着

プロービング

エクスプロービング

スケーリング

ルートプレーニング

歯面研磨

プラークコントロール

※1 歯石セットなどと組み合わせて実習する場合

※2 エエプラークなどと組み合わせて実習する場合

■歯根形態を意識したスケーリング



歯根1/3程度まで解剖的な形態の模型歯により、歯根形態を意識したスケーリング実習を行うことができます。

■根分岐部病変のプロービング・スケーリング



$\overline{76}$ にⅠ度、 $\overline{6}$ にⅡ度、 $\overline{6}$ にⅢ度の根分岐部病変を付与しているため疾患や複数根を意識したプロービングやスケーリング実習が可能です。

■骨欠損パターンの学習



$\overline{6}$ にⅠ壁性、 $\overline{5}$ にⅡ壁性、 $\overline{4}$ にⅢ壁性、 $\overline{2}$ にⅣ壁性、 $\overline{1}$ に裂開状の骨欠損パターンを付与しているため骨欠損の状態を学習することができます。

●模型歯バリエーション



解剖学的単根模型歯 [B1A-004]

X.770モデルに予め装着されている模型歯。歯根は、1/3程度まで解剖学的な形態をしています。

□部位 $\frac{7\ 5\ 321}{543\ 1}$ | $\frac{123\ 5\ 7}{1\ 345}$ の18部位

エクスプロービング

スケーリング



解剖学的単根模型歯 [A2A-X.770]

X.770モデルに予め装着されている根分岐部などの解剖学的特徴を付与した模型歯です。

□部位 $\frac{6\ 4}{76\ 2}$ | $\frac{4\ 6}{2\ 678}$ の11部位

エクスプロービング

スケーリング

●その他の交換用パーツ、オプションパーツ

X.770用粘膜 [X.770-F-GSE]



●オプション



歯石セット

模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。濃いグレー色と歯石に近似した色の2色がセットされています。

■セット内容

粉末A (歯石近似色) 8g、粉末B (濃いグレー色) 8g、液材 25mL、筆2本、ダッキンググラス2個、サンドペーパー

- 別売品
- 粉末A (歯石近似色) 8g
 - 粉末B (濃いグレー色) 8g
 - 液 25mL
 - 筆 2本
 - ダッキンググラス 1個

エクスプロービング

スケーリング

ルートプレーニング



人工プラーク

ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後の残留状態が分かりやすくなっています。

■容量

8mL

ブラッシング

プロービング



人工歯石

マニキュアタイプの人工的な歯石。1液性タイプのためスティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。

■セット内容

人工歯石 6g、うすめ液 5mL、スティック 1本

■別売品

- うすめ液 5mL

エクスプロービング

スケーリング

ルートプレーニング

歯周外科領域を極める
様々な病変状態を想定した歯周外科モデルシリーズ

歯周外科は、SRPなどの処置はもちろんのこと
歯肉切除術やフラップ手術、組織再生誘導法など、
症例によって様々な処置の組み合わせが必要と
なります。そのためには、外科処置の一連の流れ
を理解し基礎的な切開・縫合の技術を含めた様々
な外科テクニックを修得する必要があります。

歯周外科モデルシリーズは、様々な病変歯肉や
水平性および垂直性骨欠損のパターンを付与し、
外科的処置が可能なよう、全てのモデルで切開
や縫合ができる粘膜を装着しています。中等度
を想定したモデルや重度を想定したモデルがあり、
実習目的に応じて選択することができます。



歯肉切除術／004モデル

004モデルでは、歯周ポケットを形成している歯肉軟組織をポケット底から削除できる
よう、下顎前歯部と上顎左側臼歯部の歯肉に腫大した形状を付与しています。粘膜部
には切開・縫合に適した材質を用いているため、歯肉切除術や歯肉整形術などを想定
した実習をすることができます。



ポケット搔爬術・新付着術／004モデル

004モデルでは、歯周ポケット内を搔爬したりポケット底に向けて切開したりできるよう、
上顎前歯部に真性ポケットを想定した歯肉形状を付与しています。また、スケーリング・
ルートプレーニング時に歯根形状を意識できるよう、解剖学的歯根形状を付与した模
型歯を装着しています。



フラップ手術／004モデル、901Cモデル

004モデルや901Cモデルでは、フラップ手術におけるウィードマン原法やその改良法な
どのメスの入れ方や口蓋側連続縫合など、種々の切開・縫合法を実習することがで
きます。また、裂開性や2壁性などの骨欠損も付与しているため、骨整形術や組織再生
誘導法を想定した実習をすることもできます。



根分岐部病変の処置／901Cモデル

901Cモデルでは、歯根分岐を与えた模型歯と様々な垂直性骨欠損を付与した歯槽
骨部により、根分岐部の診断やファーケーションプラスティールおよびトンネリングなどの
根分岐部病変の処置を想定した実習をすることができます。また、歯根切断を想定し
たトリセクションやヘミセクションなどの実習も行う事ができます。

004 model

中度の歯周疾患モデル



歯周外科用顎模型 [P15FE-004-PS]

中等度の歯周病を想定した病変状態を付与し、歯肉切除術やフラップ手術などの歯
周外科実習が可能な顎模型。切開時の感覚を体感しながら、歯肉炎や歯周炎への基
本的な処置が修得できるよう、切開や縫合が行える病変粘膜を装着しています。
また模型歯は、歯根の1/3程度まで解剖学的形態を付与しており、オプションの人工
歯石などと組み合わせることで、肉芽組織除去後を想定したスケーリングなども行う
ことができます。

バリエーション／標準価格
●P15D-004-PS (D咬合器つき) ●P15-004-PS (咬合器なし)

構成
●解剖学的単根模型歯 B1A-004 ●004用粘膜 004-F-GSF
□部位 28歯

模型歯交換可 骨欠損歯槽骨	模型歯ナジ止め シングルマネキン装着可	病変ソフトタイプ粘膜 マグネットプレート非装着
------------------	------------------------	----------------------------

- 歯肉
切除術
- ポッケ
ット
搔爬術
- フラッ
プ
手術
- 遊離歯
肉
移植術
- 小帯切
除
・切離術
- ガービ
ング
- SRP
- 暫間
固定

歯肉切除術



下顎前歯部と上顎左側臼歯部では、歯肉炎を想定し歯肉形態を腫大させ仮性
ポケットを付与しているため、歯肉切除術の実習が可能です。

フラップ手術



上顎前歯部や下顎左側臼歯部に垂直性骨欠損を付与し、切開や骨整形、縫合な
どの様々なフラップ手術を想定した実習が可能です。

小帯切除術・小帯切離術



上唇小帯を高位置に付着させているため、小帯切除術・小帯切離術を想定した実
習を行うことができます。

交換用模型歯



解剖学的単根模型歯 [B1A-004]

004モデルに予め装着されている模型歯。歯根1/3程度ま
で解剖学的形態を持っています。

□部位 28歯

バリエーション／標準価格
●セット

スケール
ルート
プレーニング

ポケット搔爬術・新付着術



上顎前歯部や上下顎右側臼歯部に真性ポケットを想定した病変状態を付与して
いるため、ポケット搔爬術や新付着術の実習が可能です。

遊離移植術



上下顎右側犬歯部に裂溝性歯肉と裂開性骨欠損を付与しているため、遊離歯
肉移植術や遊離結合組織移植術を想定した実習が可能です。

スケーリング・ルートプレーニング



歯根の1/3程度まで解剖学的形態を付与した模型歯を装着し、歯根形態を
意識したスケーリング・ルートプレーニング実習を行うことができます。

その他の交換用パーツ



004用粘膜 [004-F-GSF]

901C model

重度の歯周疾患モデル



P15FE-901C

歯周外科用顎模型 [P15FE-901C]

重度の歯周病を想定し、フラップ手術や分岐部病変への歯周外科実習が可能な顎模型。種々のフラップ手術が実習できるよう、切開・縫合が可能な粘膜を装着し、歯槽骨部に強い水平性や垂直性の骨吸収を付与しています。また、ファークーションプラスティナーなどの根分岐部病変の処置ができるよう、根分岐部を付与した模型歯にてⅠ度からⅢ度までを想定した病変を付与しています。模型歯には、予め歯石を付着させ肉芽組織除去後を想定したルートプレーニングも行うことができます。

- バリエーション／標準価格
- P15D-901C(D咬合器つき) ¥36,440
 - P15-901C(咬合器なし) ¥31,580

- 構成品
- 解剖学的単根模型歯 B1A-901C
 - 901C用粘膜 901C-F-GSF
 - 部位 〔6〕以外の31部位

模型歯交換可	模型歯ネジ止め	病変ソフトタイプ粘膜
骨欠損歯槽骨	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

- フラップ手術 組織再生誘導法 骨整形術 ファークーションプラスティナー 歯根切断 トンネル プロービング SRP

■フラップ手術



フラップ手術を想定した様々な手法による切開、骨整形、縫合実習が可能です。また、模型歯に予め歯石を付着させているため、肉芽組織除去後を想定したルートプレーニングも可能です。

■根分岐部診断



根分岐部病変を意識したプロービングやエキスプロービングが可能なおよう、歯根を分岐した模型歯にて、Ⅰ度～Ⅲ度までの病変を付与しています。

■歯根切断



〔6〕〔6〕〔6〕にⅢ度の分岐部病変を付与しているため、歯根切断を想定したヘミセクションやトリセクションを行うことができます。

●交換用模型歯



解剖学的単根模型歯 [B1A-901C]

901Cモデルに予め装着されている歯石付き模型歯です。歯根2/3程度まで解剖学的歯根形状を有し歯根分岐も付与されています。

- 部位 87654321 | 12345678
87654321 | 12345 78 の31歯

- バリエーション／標準価格
- セット

- エキスプロービング スケーリング

■組織再生誘導法



歯槽骨に裂開性や2壁性などの骨欠損を付与し、組織再生誘導法の処置を想定したルートプレーニングやメンブレンの設置などの実習も可能です。

■ファークーションプラスティナー



〔7〕〔7〕〔7〕にⅡ度を想定した分岐部病変を付与しています。ファークーションプラスティナーを想定したオドントプラスティナーなどの実習が可能です。

■トンネル形成



〔6〕〔7〕では、Ⅲ度を想定した分岐部病変を付与しているため、歯槽骨に形態修正を施すトンネル形成が可能です。

●その他の交換用パーツ



901C用粘膜 [901C-F-GSF]



舌模型 [Z-1]

舌排除の練習に使用する模型。模型後部からクリップで固定します。004モデル、901Cモデルに装着可能です。



※顎模型は含まれません。

●オプション



歯石セット

歯石セット

模型歯との適度な密着性と賦形性を備えた常温重合型レジンタイプの人工的な歯石。濃いグレー色と歯石に近似した色の2色がセットされています。

- セット内容
- 粉末A (歯石近似色) 8g、粉末B (濃いグレー色) 8g、液材 25mL、筆2本、ダッピンググラス2個、サンドペーパー

- 別売品
- 粉末A (歯石近似色) 8g
 - 粉末B (濃いグレー色) 8g
 - 液 25mL
 - 筆 2本
 - ダッピンググラス 1個

- エキスプロービング スケーリング ルートプレーニング



人工歯石

人工歯石

マニキュアタイプの人工的な歯石。1液性タイプのためスティックを用いて模型歯に簡単に付着させることができます。

- セット内容
- 人工歯石 6g、うすめ液 5mL、スティック 1本

- 別売品
- うすめ液 5mL

- エキスプロービング スケーリング ルートプレーニング

Others

その他のモデル



T6-OPE.SET.1

切開・縫合実習キット オペガム [T6-OPE.SET.1]

基本的な切開法や縫合法を実習するためのモデル。生体に近い感覚を体感しながら様々なテクニックを実習することができます。詳しくは、72ページの詳細をご覧ください。

- セット内容
- 台座 1個、オペガムシート T6-OPE.S1 1枚

- 別売品
- オペガムシート T6-OPE.S1 1枚

- 切開 骨膜剥離 縫合

ブラッシングテクニックを極める
プラークコントロールモデルシリーズ

様々な歯列や疾患に対して、色々な歯 ブラシやフロスを用いたテクニックが必要となるプラークコントロール。
その修得には、ブラシの特性に加え、その動かし方や力加減などの違いによるブラッシング効率を理解する必要があります。プラークコントロールモデルシリーズは、様々なテクニックを実習できるよう、

天然歯形態の模型歯を装着したモデルや叢生歯列やインプラントを付与した臨床に近いモデルがあります。これらのモデルに人工的な歯垢を付着させて実習することで、歯垢の取れ具合を繰り返し体感しながらブラッシングやフロッシングどのテクニックや様々なブラシの特性などをより早く理解することができます。



■ブラッシング



人工ブラークと組み合わせて実習することにより、歯ブラシの動かし方や力加減の違いによるブラークの取れ具合を繰り返し体感しながら、様々なブラッシング方法や歯ブラシの特性などを理解することができます。

ブラッシング指導模型 [P3D-801]

叢生など臨床で見られる様々な状態を付与した顎模型。ブラッシング、フロッシングを通して、色々なブラシの特性やテクニックの修得ができるよう、叢生歯列や半萌出歯、インプラントを想定した補綴物などを付与しています。
また、別売の人工ブラークと組み合わせることで、ブラッシング方法の違いによる歯垢の取れ具合を体感しながら実習することができます。

模型歯交換不可	ソフトタイプ粘膜	粘膜交換不可
シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着	

※PSアダプターにより装着可能



■フロッシング



人工ブラークと組み合わせることにより、フロスなどの補助的用具の特性や動かし方などのフロッシング方法をブラークの取れ具合を確認しながら理解することができます。

複製歯牙着脱模型 [i2D-400C (ピンク色)]

歯冠形状を意識した基礎的なブラッシングやフロッシング実習が可能なよう、天然歯形態の模型歯がピンク色のソフトタイプ顎に装着されたモデル。また模型歯は着脱が可能なため、歯冠や歯根形態の観察も可能です。

■バリエーション／標準価格
●i21 D-400C (D咬合格つき) (クリアピンク色)

■構成品
●複製根模型歯 B2-306
□部位 28歯

天然歯形態模型歯装着	模型歯着脱可	ソフトタイプ粘膜
シンプルマネキン装着可*	マグネットプレート非装着	

※PSアダプターにより装着可能



●模型歯バリエーション



複製根模型歯 [B2-306]

400Cシリーズに装着されている天然歯を複製した模型歯です。

□部位 28部位

■バリエーション／標準価格

●セット



●オプション



人工ブラーク

ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後のブラークの取れ具合が分かりやすくなっています。

■容量
8mL



人工ブラークの使用方法



① 容器をよく振り、均一に混ぜます。



② 蓋に付属の筆を用いて模型歯表面に塗布します。



③ 約5分間乾燥させます。



④ ブラッシング実習を行います。

Others

その他のモデル



P3B-705



ブラッシング指導模型（永久歯）
[P3B-705]

集団指導実習時に大きく見やすく説明できるようにした拡大モデル。2倍大モデルのため、ブラッシングやフロッシング時のブラシの当て方や動かし方などが見やすくなっています。また、6.4 が取り外し可能のため早期接触や歯が抜けた場合の指導もできるようになっています。

関連商品

- 指導用ブラシ [P3-TB]
- 指導用歯間ブラシ [P3-IDB]

口腔外科・矯正・
放射線・理工実習

Oral Surgery, Orthodontics,
Radiation, Dental Engineering



咬合器の着脱方法

○咬合器の外し方



付属のドライバーを用いて咬合器固定用ネジ4本を外します。

咬合器を外す時、咬合器の種類によっては、バネの力で咬合器が勢いよく閉じることがあります。指を挟まないように注意してください。


○咬合器の取り付け方



咬合器の上下に注意して、上顎に固定用ネジ2本を仮止めします。



同様に下顎を仮止めします。

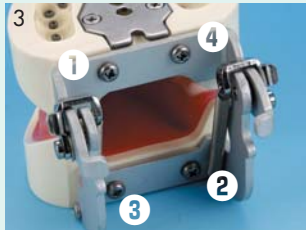

模型を正しく咬合させた状態で固定用ネジを写真の順番で締めつけます。



咬合器固定用ネジ

咬合器を模型に固定するためのネジです。FE咬合機、D咬合器用の2種類あります。

種類／容量

- FE咬合器用固定ネジ 4本入
- D咬合器用固定ネジ 4本入



FE咬合器

開口位、最大開口位で固定できる各種咬合運動が可能な咬合器です。

※咬合器は、装着のため予め顎模型にネジ穴が必要です。ネジ穴がない模型の場合はお問い合わせください。



D咬合器

机上などに置いて実習する際、180°以上開口できる咬合器です。各種咬合運動は可能ですが開口位で固定はできません。

口腔外科領域

- ・切開・縫合用キット
- ・湿潤麻酔モデル
- ・口腔外科モデル

P72

P72

P72

P73

矯正領域

- ・タイポドントモデルシリーズ
- ・不正咬合モデルシリーズ

P74

P74

P75

放射線領域

P77

理工学実習領域

P78

拔牙、縫合などの外科的処置を極める 口腔外科モデルシリーズ

様々な症例によって、色々な施術が必要となる外科的処置。
 拔牙などの口腔外科のテクニックを修得するため、色々な麻酔法や切開・縫合法などを含めた基本的な流れを一貫して実習することは欠かせません。

口腔外科モデルには、基本的な切開・縫合のテクニックや浸潤麻酔の実習ができるモデル、拔牙や膿症切開など様々な口腔外科処置が可能なモデルがあり、目的に応じて選択が可能です。



T6-OPE.SET.1

T6-OPE.S1

切開・縫合実習キット オペガム [T6-OPE.SET.1]


基本的な切開法や縫合法を修得するためのモデル。粘膜シートが適度な張りを持って台座に固定されることにより、器具から伝わる感覚を体感しながら様々な切開・縫合法を実習することができます。粘膜シート部は、歯肉域に近づけるため歯肉・骨膜・歯槽骨を想定した3層からなり、交換も可能です。

■ セット内容

台座 1個、オペガムシート T6-OPE.S1 1枚

■ 別売品

・オペガムシート T6-OPE.S1 1枚

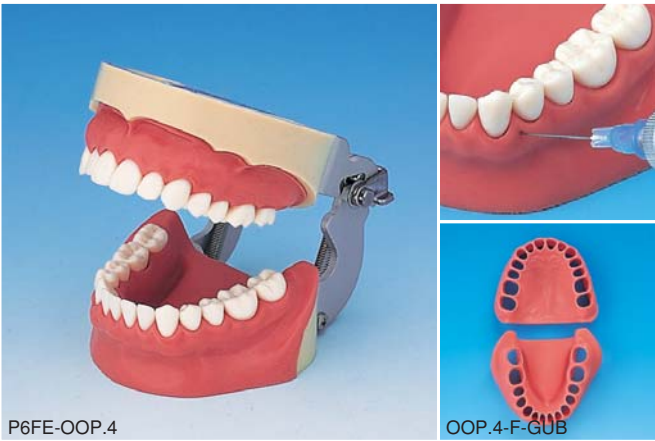

P6FE-OOP.4

OOP.4-F-GUB

浸潤麻酔用顎模型 [P6FE-OOP.4]

種々の手法による浸潤麻酔の実習が可能なよう、ソフトタイプ粘膜を装着した顎模型。刺入点の跡が残りにくく、繰り返し実習を行うことができます。

■ バリエーション／標準価格

・P6D-OOP.4 (D咬合器つき)

・P6-OOP.4 (咬合器なし)

■ 標準装備品

・単根模型歯 A5A-500

・OOP.4用粘膜 OOP.4-F-GUB

■ 別売品

・単根模型歯 A5A-500

・OOP.4用粘膜 OOP.4-F-GUB

単根模型歯装着	模型歯交換可	ソフトタイプ粘膜
粘膜刺入可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



P15FE-OOP.1

■ 麻酔



ソフトタイプ粘膜を装着しているため、浸潤麻酔などを想定した実習を行うことができます。

■ 難拔牙



下顎右側智歯では、難拔牙を想定した粘膜切開、剥離、歯の脱臼、揺爬、縫合までの実習を行うことができます。

■ 脱臼歯牙の再植固定



拔牙後の模型歯を用いれば、脱臼歯を想定した脱臼歯の揺爬やレジン固定などの再植固定実習を行うことができます。

■ 膿症切開



下顎右側切歯部の歯肉移行部では膿症を想定した液体を付与し、膿汁の排膿やドレーン挿入などの術式を行うことができます。

口腔外科用顎模型 [P15FE-OOP.1]

麻酔や拔牙、膿症切開などの口腔外科実習が可能なよう、様々な擬似的病変を付与した顎模型。天然歯形状の模型歯が装着され、拔牙時の脱臼感や歯根膜揺爬時の感覚が体感できるよう、歯根膜を想定した軟質材料で固定されています。また、切開縫合が可能な粘膜を装着し埋伏歯の拔牙や膿症切開、骨隆起の削除など様々な口腔外科実習を行うことができます。

■ バリエーション／標準価格

・P15D-OOP.1 (D咬合器付)

・P15-OOP.1 (咬合器なし)

天然歯根模型歯装着	模型歯強粘着固定	模型歯・粘膜交換不可
切開・縫合用粘膜装着	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着



■ 普通拔牙



61|16 61|16 では模型歯が歯根膜を想定した軟質材料で固定されているため、種々の拔牙運動による実習が可能です。

■ 埋伏歯の拔牙



下顎左側智歯を水平埋伏状態としているため、埋伏歯の拔牙を想定した骨削除や歯冠・歯根分割、摘出などの実習が可能です。

■ 骨隆起の削除



上顎左側臼歯頬側部に骨隆起を付与し、切開や粘膜剥離、マレットなどを用いた骨削除などを行うことができます。

■ 歯根端切除



上顎右側中切歯に根尖病巣を想定した軟質材料を付与し骨の削除、歯根端切除、病巣摘出を想定した実習を行うことができます。

様々な矯正テクニックを極める
矯正モデルシリーズ



Typodont models

タイポドントモデルシリーズ



■タイポドント実習

タイポドント用模型歯、ワックスフォームと他社製タイポドント咬合器を組み合わせることにより、種々のタイポドント実習を行うことができます。

タイポドント実習模型の組み合わせ

模型歯



ワックス
フォーム



咬合器

●模型歯



B9-500

タイポドント用模型歯 [B9-500]

模型歯の中で一般的なA5A-500モデルと形態が同じタイポドント実習用模型歯。バンドやブラケットの装着が行いやすいよう、歯冠部をプラスチック製に歯根部を金属製にしています。

□部位 28歯

■バリエーション／標準価格

●単品



B9-320C

タイポドント用模型歯 [B8-320C]

金属製タイポドント用模型歯。歯冠部、歯根部の全てが金属で作られています。

□部位 28歯

■バリエーション／標準価格

●単品

●ワックスフォーム



■特注品 ワックスフォーム [DN3-各種]

アングルの不正咬合の分類法に基づいた、ワックスフォームです。

※価格や特注可能な仕様などについてはお問い合わせください。

Malocclusion models

不正咬合モデルシリーズ



D1-O22B

D1-O1B

D1-O3A

1色レジン製不正咬合模型 [D1-O各種]

アングルの不正咬合の分類法に基づいた、1色レジン製不正歯列模型です。

■バリエーション／標準価格

●D1D-O各種 (D咬合器つき)

※3Bタイプは、咬合の関係上、咬合器は装着できません。

模型歯一体型

模型歯交換不可



P12P-O1C

P12P-O1A

P12P-O22A

透明レジン製不正咬合模型 [P12P-O各種]


D1-Oモデルシリーズと同じ歯列の透明タイプのモデルです。

3Bタイプは、咬合器のないタイプのみとなります。

■バリエーション／標準価格

●P12-O各種 (咬合器なし)

模型歯交換不可

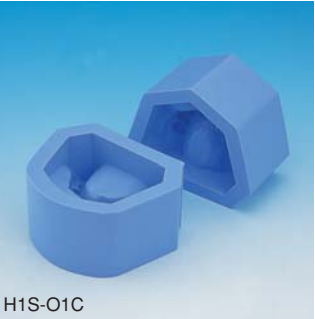

H1S-O1C

石こう模型用陰型 (不正咬合)
[H1S-O各種]

D1-Oモデルシリーズと同じ歯列の石こう模型用陰型です。

■包装

上下顎 各1個入

D1-O各種・P12P-O各種・H1S-O各種 形態一覧表

型番号	分類	型番号	分類	型番号	分類
1A	I 級 反対咬合	21A	II 級 1 類 過蓋咬合	3A	III 級 反対咬合
1B	I 級 正中離開	21B	II 級 1 類 叢 生	3B	III 級 反対咬合
1C	I 級 叢 生	22A	II 級 2 類 過蓋咬合	1BN	O21B矯正治療後の状態で保定装置作製用模型
		22B	II 級 2 類 叢 生		

※アングル氏分類による。

Others

その他のモデル



P3B-704




ブラッシング指導模型（矯正）
[P3B-704]


矯正治療時の歯みがき指導用にブラケット、ワイヤーを付与した2倍大モデルです。拡大モデルのため、ブラッシング時の歯ブラシの当て方や動かし方などが見やすくなっています。

関連製品


- 指導用ブラシ [P3-TB]
- 指導用歯間ブラシ [P3-IDB]

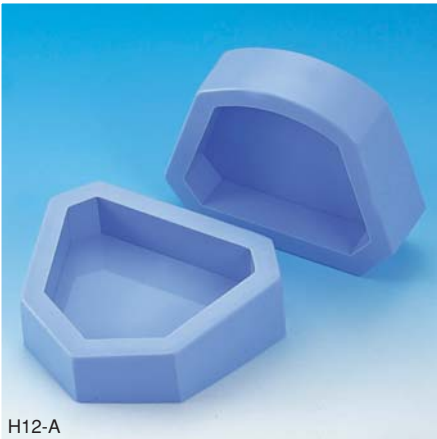

H12-A

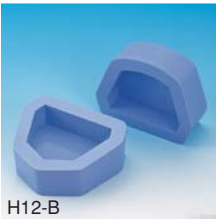

H12-B

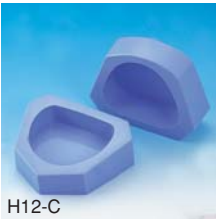

H12-C

スタディモデルゴム枠 [H12-各種]

スタディモデルの土台製作用ゴム枠です。永久歯顎用と乳歯顎用があり、永久歯顎用は外形の異なる角型と丸型の2種類あます。


バリエーション／標準価格

- 永久歯顎用 角形 H12-A
- 永久歯顎用 丸型 H12-C
- 乳歯顎用 角型 H12-B

包装

上下顎 各1個入

H12-各種 寸法表

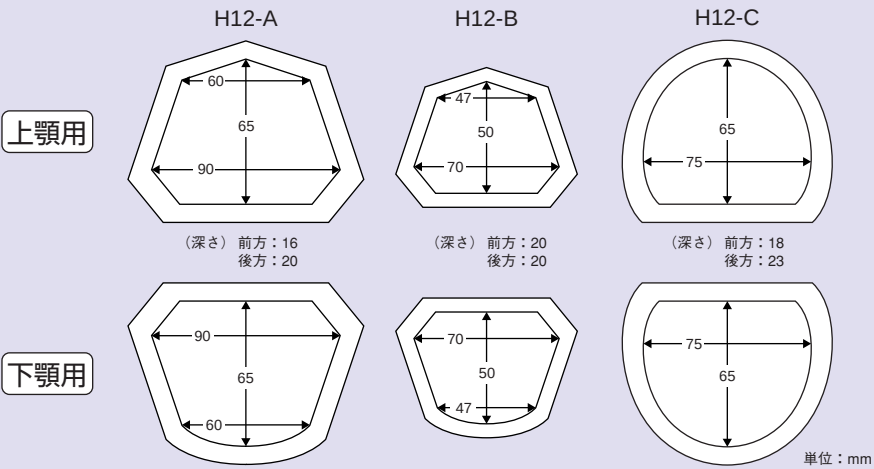

デンタルレントゲン撮影術を極める
レントゲンシュミュレーター



10枚法



X線ファントム

デンタルレントゲン撮影を想定したレントゲンシュミュレーター。デンタルレントゲンでの2等分法を想定し、各撮影部位によるフィルムの角度や投影角など基本的なレントゲンテクニックが修得できるよう、顎模型に解剖学的特長とX線造影性を付与しています。

また、自由に動くフィンガーアームにより任意の位置でフィルムを保持することができます。1人で10枚法や14枚法を想定した実習を行うことができます。

簡単にチェアーに取り付けたり自立させたりして設置できるよう、ファントムユニットはトランクに収納されています。

セット内容

ヘッドベースユニット、マスク、顎模型 P27-XR.2、咬合器、デスククランプユニット

- 2等分法
- 咬合撮影法

●セット内容



ヘッドベースユニット



マスク



顎模型 P27-XR.2



咬合器



デスククランプユニット



トランクユニット

理工学鑄造実習のための
試験体モデル



理工学実習用モデル A.D.A規格 No.2試験体
[T2-CM]

理工学鑄造実習に使用する試験体モデル。MOD型窩洞模型とクラウン型支台歯模型の2種類がセットされ、鑄造法の違いによる鑄造体の浮き上がり試験や印象材や石こうなどの模型材の試験が可能です。

セット内容

MOD型窩洞模型 1個、クラウン型支台歯模型 1個、金属リング 1本、離型材 1本

別売品

- MOD型窩洞模型
- クラウン型支台歯模型
- 金属リング
- 離型材

鑄造
試験

印象
試験

模型材
試験

小児歯科分野
Pediatric Dentistry



- | | |
|-------------|-----|
| ・SW.K.14モデル | P81 |
| ・407Cモデル | P83 |
| ・407Hモデル | P84 |
| ・400Dモデル | P84 |
| ・705モデル | P85 |

小児歯科処置を極める
様々な実習が可能な小児モデルシリーズ

発育段階においてそれぞれ特長をもち、その段階に合わせた処置方法が必要となる小児歯科。その処置のためには、その後の発育を考慮したテクニックを修得する必要があります。それらの修得には、形成時のハンドリングなどの理解のため、基礎的なテクニックを一貫して実習することは欠かせません。

小児モデルシリーズは、様々な分野の処置が必要となる小児実習のため、色々な発育段階に変化でき、その段階と症状に合わせた実習が可能なモデルや歯冠修復実習に特化したモデルなどがあり目的に応じた選択が可能です。



歯冠修復／SW.K.14モデル、407Cモデル

SW.K.14モデルや407Cモデルでは、タービンでの形成に適した切削性を持った模型歯を装着し、切削感を体感しながら乳歯冠やレジン修復を想定した様々な形成方法を修得することができます。また、ラバーダム防湿も可能なため、レジン修復を想定した実習では、形成から填塞までの一貫した流れを実習することができます。



生活歯髄切断／SW.K.14モデル

SW.K.14モデルでは、歯髄を想定した軟質材料を付与した単根模型歯を装着し、天蓋除去の感覚や根部歯髄の切断時の感覚を体感しながら歯髄切断法を想定した髄室開孔から仮封までの一貫した実習が可能です。また、歯根部を透明にしているため、実習後の歯髄切断断面の状態を容易に確認することができます。



保険装置の製作・装着／SW.K.14モデル

SW.K.14モデルでは、拔牙や拔牙後を想定した固定式保険装置の製作や装着実習を行うことができ、拔牙を想定した部位の下部には歯胚を埋め込むことで保険の必要性を理解しやすくしています。また、歯列を欠損状態にできる欠損プラグを装着することにより、早期喪失を想定した可撤式保険装置の製作や装着実習も可能です。



プラークコントロール／SW.K.14モデル、400Dモデル

ⅡA期を想定した400Dモデルでは、解剖学的形態の模型歯を装着し、歯冠や歯根形態を勘案した実習が可能です。また、SW.K.14モデルでは、ⅡA期とⅡC期の2つの段階に変更できるため、それぞれの状態に合わせた実習が可能です。これらのモデルに人工プラークを付着させることで、歯垢の取れ具合を繰り返し体感しながら実習することができます。



■支台形成



E D C | A C E D | では形成に適した切削性を持った模型歯により、切削感を体感しながら様々な修復物を想定した形成方法を実習することができます。また、形成後の既成乳歯冠の調整・装着までの一貫した実習も可能です。

■窩洞形成



E D C | A C E D | では、2級や3級レジン修復などを想定した実習が可能なよう、切削性を持った模型歯を装着しています。また、ラバーダムも装着することができ、マトリックスバンドやウェッジなどを用いた実習を行うことができます。

■拔牙実習



D E | D | には、天然歯を複製した模型歯を装着し、拔牙実習が可能です。また、その下部には歯胚を想定した模型歯を埋入しており、歯根と歯胚との位置関係や解剖学的な歯根形状を理解することができます。

■予防填塞



予防填塞実習を想定し、ラバーダム装着が可能なようソフトタイプ粘膜を装着し、第一大臼歯の小窩裂溝を複雑で深い形状としています。また、模型歯を交換することで萌出状態を変えることができるためセメント系やレジン系の填塞も可能です。

小児歯科用顎模型 [D75FE-SW.K.14]

ソフトタイプ粘膜を装着し、既成乳歯冠支台歯形成やⅡ級レジン窩洞形成、生活歯髄切断法など様々な小児歯科実習が可能な混合歯列顎模型。ⅡA期とⅡC期の異なる2つの発育段階を想定した実習が行えるよう、欠損状態を再現できる欠損プラグや萌出状態の異なる永久歯模型歯を添付し、口腔衛生指導や萌出途上の第一大臼歯への口腔衛生指導も行うことができます。また、保険装置の実習を想定した部位の下部には歯胚を想定した模型歯を埋伏し、保険の必要性をより理解しやすくしています。

■セット内容
顎模型SW.K.14 1個、欠損プラグ 9本、乳歯模型歯 2本、永久歯模型歯 4本
■バリエーション／標準価格
●D75D-SW.K.14 (D咬合器つき) ●D75HD-SW.K.14 (咬合器なし)

構成品									
部位	標準品		添付品		部位	標準品		添付品	
	模型歯		交換用模型歯	欠損プラグ		模型歯		交換用模型歯	欠損プラグ
A	A3-310		—	A2-466	A	A2A-343		—	A2AN-467
B	A3-310		—	—	B	A3-310		—	—
C	A3A-310		—	—	C	A3A-310		—	—
D	A3A-310		—	—	D	B4-309		—	A2-468
E	A3A-310		—	—	E	A3A-310		—	—
G	A2A-528	A2AN-530	A2AN-534		G	A2A-529	A2AN-531	A2AN-535	
H	A2-280	A2-448	—		H	A2-280	A2-477	—	
I	A3-310		—	—	I	A3-310		—	—
J	A8-SW.K.12		—	—	J	A8-SW.K.12		—	—
K	A3A-310		—	—	K	B4-309		—	A2-469
L	B4-309		—	A2-470	L	A24A-204		—	—
M	A1A-SW.K.10	A2AN-533	A2AN-450		M	A1A-SW.K.10	A2AN-532	A2AN-449	

SW.K.14用粘膜 SW.K.14-F-GSE

模型歯交換可	模型歯1部ナシ止め	ソフトタイプ粘膜
シリコン印象材使用不可	シンプルマネキン装着可	マグネットプレート装着

支台歯・窩洞形成	レジン填塞	歯髄切断	拔牙	クラウンループの製作・装着	可撤性保険装置の製作・装着	アルジネット連合印象	予防填塞	プラークコントロール
----------	-------	------	----	---------------	---------------	------------	------	------------

※人工プラークなどと組み合わせて実習する場合

■歯髄切断



E | には、歯髄を想定した軟組織を付与した模型歯を装着しているため、歯髄切断を想定した実習が可能です。また、歯根部を透明としているため、糊剤貼付や仮封後の状態を容易に確認することができます。

■保険装置の製作・装着



D E | D | に欠損プラグを用いることで固定性や可撤性の保険装置の製作実習が可能です。また、その下部には歯胚を埋入し、保険の必要性を理解しやすいようにしています。また、A | A | にも欠損プラグを装着することができます。

■プラークコントロール



ⅡC期では、萌出途上の第一大臼歯への歯みがき指導を想定した実習を行うことができます。また、D | D | D | D | を欠損プラグに 1 | 1 | を乳切歯に交換することでⅡA期を想定した実習も行うことができます。

●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 乳歯（ネジなし）【A3-310】
予めSW.K.14モデルにワックスにて仮着されている乳歯模型歯です。
□部位

BA	B
B	B

 の5部位

ブラーク
コントロール



単根模型歯 乳歯【A3A-310】
予めSW.K.14モデルに装着されている乳歯模型歯です。
□部位

EDC	C	E
D		

 の6部位

支台歯・
窩洞形成

ブラーク
コントロール



単根模型歯 乳歯【A2A-343】
予めSW.K.14モデルに装着されている乳歯模型歯です。
□部位

A

 の1部位

支台歯・
窩洞形成

ブラーク
コントロール



歯髄切断用乳歯模型歯【A24A-204】
歯髄切断が可能なよう、歯髄を想定した軟質材料を付与し歯根を透明にした乳歯模型歯。予めSW.K.14モデルに装着されています。
□部位

E

 の1部位

生活歯髄
切断



単根模型歯 永久歯【A1A-SW.K.10】
予めSW.K.14モデルの

6	6
---	---

 に装着されている半萌出状態を表現した永久歯模型歯です。
□部位

6	6
---	---

 の2部位

予防
填塞

ブラーク
コントロール



単根模型歯 永久歯（ネジなし）【A2-280】
予めSW.K.14モデルの

1	1
---	---

 に装着されている半萌出状態を想定した永久歯模型歯です。
□部位

1	1
---	---

 の2部位

ブラーク
コントロール



複製根乳歯模型歯【B4-309】
予めSW.K.14モデルに装着されている天然歯形状の乳歯模型歯です。
□部位

	D
E	D

 の3部位

抜歯

解剖



単根模型歯 乳歯（ネジなし）【A8-SW.K.12】
予めSW.K.14モデルに装着されている乳歯模型歯です。
□部位

C	C
---	---

 の2部位

ブラーク
コントロール



単根模型歯 永久歯【A2A-528, 529】
予めSW.K.14モデルの

6	6
---	---

 に装着されている半萌出状態を表現した永久歯模型歯です。
□部位

6	A2A-528	6	A2A-529
---	---------	---	---------

 の2部位

予防
填塞

ブラーク
コントロール




単根模型歯 乳歯（ネジなし）【A2-447, 448】
SW.K.14をⅡCからⅡA期に変更する際に使用する交換用乳歯模型歯。予め模型に添付されています。
□部位

A	A2-448	A	A2-447
---	--------	---	--------

 の2部位

ブラーク
コントロール

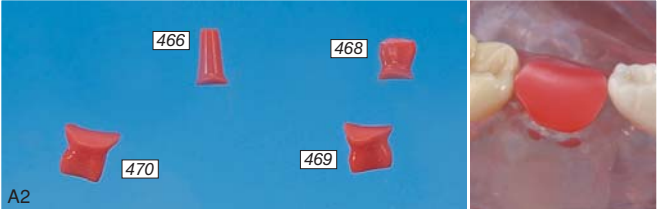


欠損プラグ【A2-各種】
SW.K.14モデルを簡易的に欠損状態にするための部品です。欠損させたい部位に模型歯と同じように装着させて使用します。予め模型に添付されています。
□部位

A	A2-466	D	A2-468
E	A2-470	D	A2-469

 の4部位

保険装置
の製作

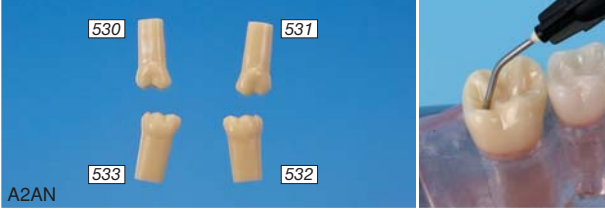

単根模型歯 永久歯【A2AN-530～532】
SW.K.14モデルをⅡCからⅢA期に変更する際に使用する第一大白歯の萌出完了状態を想定した交換用模型歯。予め模型に添付されています。
□部位

6	A2AN-530	6	A2AN-531
6	A2AN-533	6	A2AN-532

 の4部位

予防
填塞

ブラーク
コントロール




欠損プラグ【A2AN-各種】
SW.K.14モデルを簡易的に欠損状態にするための部品です。欠損させたい部位に模型歯と同じように装着させて使用します。予め模型に添付されています。
□部位

6	A2AN-534	A	A2AN-467	6	A2AN-535
6	A2AN-450	6	A2AN-449		

 の5部位

保険装置
の製作

ブラーク
コントロール

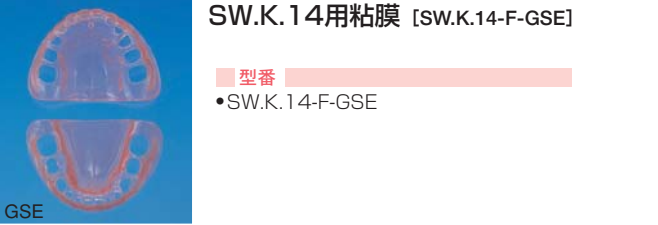

SW.K.14用粘膜【SW.K.14-F-GSE】
型番

SW.K.14-F-GSE



小児実習用顎模型【D5D-407C】

ⅡA期の発育段階を想定したハードタイプ粘膜の乳歯顎模型。模型歯はワックスで固定されており、簡単に交換が可能です。切削感をより天然歯に近づけたA20模型歯に交換することで、より実践的な感覚を体感しながら様々な形成実習を行うことができます。

バリエーション／標準価格
●D5-407C（咬合器なし）

標準装備品

●単根模型歯 乳歯 A3-310
□部位

EDCBA	ABCDE
EDCBA	ABCDE

 の20部位

模型歯交換可	模型歯ワックス止め	ハードタイプ粘膜
シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着	
支台歯・ 窩洞形成	レジン・ 填塞	歯髄 切断
	抜歯	クラウン・ ループの 製作・装着
		可塑性 保険装置の 製作・装着
		アルジネート 印象
		予防 填塞
		ブラーク コントロール

※ラバーダム装着不可

●交換用模型歯、オプション模型歯



単根模型歯 乳歯（ネジなし）【A3-310】
407Cモデルに予め装着されている乳歯模型歯です。
□部位

EDCBA	ABCDE
EDCBA	ABCDE

 の20部位

予防
填塞

支台歯・
窩洞形成

バリエーション／標準価格
●セット



切削用乳歯模型歯（ネジなし）【A20-310】
エナメル質と象牙質との切削性に違いを持たせた模型歯。A3-310模型歯より切削感を天然歯に近づけています。
□部位

EDC	A	DE
D		E

 の9部位

支台歯・
窩洞形成

ブラーク
コントロール

バリエーション／標準価格
●セット



D7D-407H

●交換用模型歯、オプション模型歯



A8-407H

単根模型歯 混合 [A8-407H]

407Hモデルに予め装着されている混合歯の模型歯です。

□部位 $\frac{6EDC21|12CDE6}{6EDC21|12CDE6}$ の24部位

■ バリエーション／標準価格

●セット

予防
填塞

支台・
窩洞形成

ブラーク
コントロール

小児実習用顎模型 [D7D-407H]

ⅢA期の発育段階を想定した粘膜がハードタイプの混合歯列顎模型。模型歯はワックスで固定されており、簡単に交換可能です。乳歯交換期を想定した予防填塞やブラッシング指導実習などを行うことができます。

■ バリエーション／標準価格

●D7-407H (咬合器なし)

■ 標準装備品

●単根模型歯 混合歯 A8-407H

□部位 $\frac{6EDC21|12CDE6}{6EDC21|12CDE6}$ の24部位

模型歯交換可	模型歯ワックス止め	ハードタイプ粘膜
シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着	

支台歯・ 窩洞形成	レジン 填塞	歯髄 切断	抜歯	クラウン ループの 製作・装着	可塑性 保険装置の 製作・装着	アルジナート 印象	予防 填塞	ブラーク コントロール
--------------	-----------	----------	----	-----------------------	-----------------------	--------------	----------	----------------

※ラバーダム装着不可



人工ブラーク

人工ブラーク

ピンクに着色されたマニキュアタイプの人工的な歯垢。乾燥時間が速く適度な膜厚と模型歯への密着性があり、ブラッシング後の残留状態が分かりやすくなっています。

■ 容量

8mL

ブラッシング

歯磨き指導顎模型 (乳歯列)

[P3B-703]

集団指導実習時に見やすく説明できるようにした拡大乳歯顎モデル。2倍大モデルのため、ブラッシング時のブラシの当て方や動かし方などが見やすくなっています。

■ 関連商品

- 指導用ブラシ [P3-TB]
- 指導用歯間ブラシ [P3-IDB]



P3B-703



P3-TB

P3-IDB

複製歯牙着脱顎模型 (乳歯列)

[i3D-400D] (ピンク色)

ⅡA期の発育段階を想定したピンク色のソフトタイプ顎モデル。天然歯形態の模型歯が装着され、歯冠形状を意識した基礎的なブラッシング実習が可能です。また、模型歯は着脱が可能のため、歯冠や歯根形態の観察も可能です。

■ バリエーション／標準価格

●i31D-400D (D咬合器付) (クリア色)

■ 標準装備品

●複製根模型歯 乳歯 B4-309B

□部位 $\frac{EDCBA|ABCDE}{EDCBA|ABCDE}$ の20部位

天然歯形態模型歯装着	模型歯着脱可	ソフトタイプ粘膜
シンプルマネキン装着不可	マグネットプレート非装着	

ブラーク
コントロール

歯の
解剖



i3D-400D (ピンク)



i31D-400D (クリアピンク)

●交換用模型歯、オプション模型歯



B4-309B

複製根模型歯 乳歯 [B4-309B]

400Dモデルに予め装着されている乳歯模型歯です。

□部位 $\frac{EDCBA|ABCDE}{EDCBA|ABCDE}$ の20部位

■ バリエーション／標準価格

●セット

ブラーク
コントロール

歯の
解剖



粘膜の着脱方法

○粘膜の外し方



模型歯を1本おきに取り外します。
(「模型歯の外し方」参照 / P18)



粘膜をゆっくりと外します。

粘膜は非常にデリケートな素材で作られています。強く引っ張ったり、鋭利なもので引っかけたりすると破れたり伸びたりする原因となります。取扱いには、注意してください。


○粘膜の取り付け方



粘膜を模型に装着します。



模型歯を挿入します。

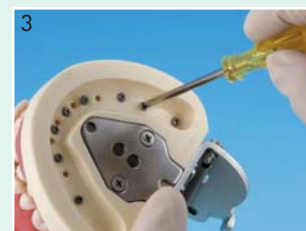

模型歯固定ネジを締め付け固定します。
(「模型歯の取り付け方」参照 / P18)

歯の解剖分野

Anatomy and Pathology



永久歯等倍大モデル

P88



永久歯拡大モデル

P88




乳歯モデル

P90



カービング用モデル

P90

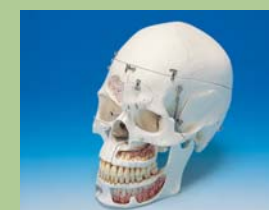

頭蓋骨モデル

P91


歯の解剖学を極める
様々なバリエーションの解剖モデル



歯の解剖

天然歯を複製した模型歯には、色々な形態のモデルがあります。解剖学の標本として、また歯型彫刻時やスケッチの際の見本として使用することができます。

model 永久歯等倍大モデル

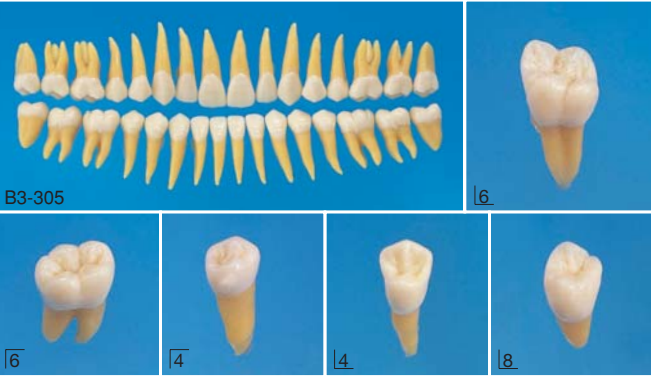


複製根模型歯 [B3-305]

□部位 32歯

バリエーション／標準価格

●単品

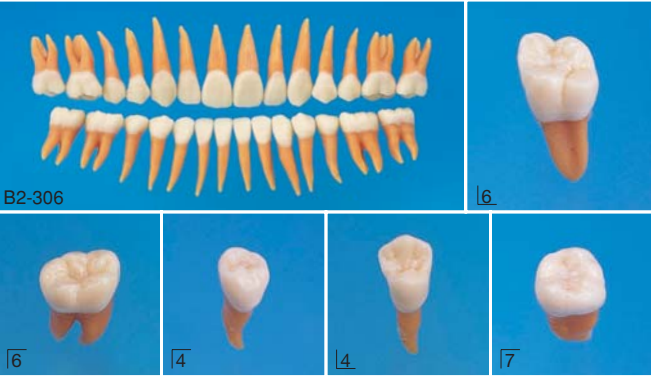


複製根模型歯 [B2-306]

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●単品

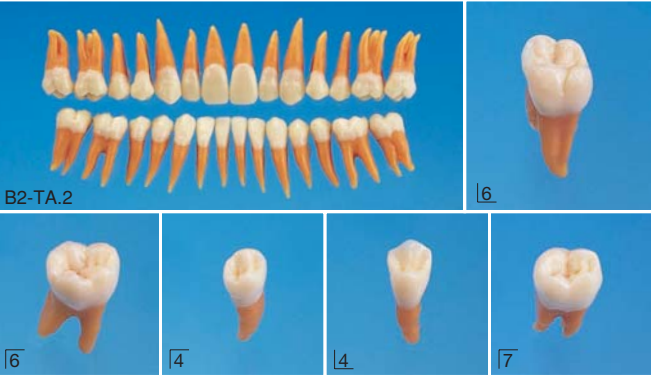


複製根模型歯 [B2-TA.2]

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●単品

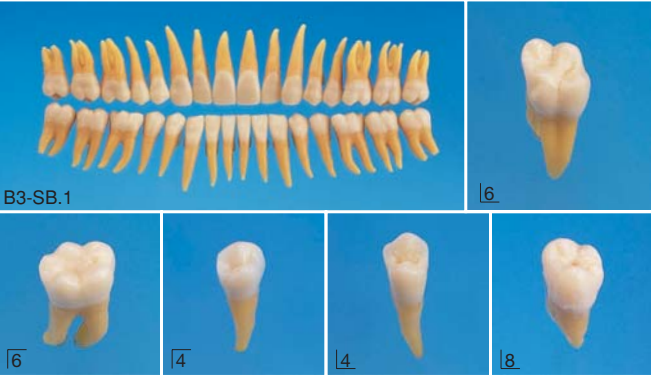


複製根模型歯 [B3-SB.1]

□部位 32歯

バリエーション／標準価格

●単品

model 永久歯拡大モデル

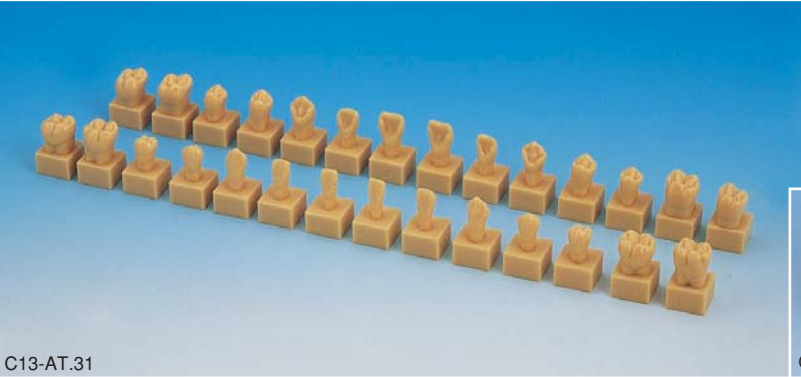

C13-AT.31

1.2倍大台付き模型歯 [C13-AT.31] (アイボリー)

カービングの見本用として、歯根部2/3程度まで根形成が施された模型歯。アイボリーとグレーの2色から選択できます

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●グレー色 C13-MT.31

●単品



C13-AT.31 |7

C13-AT.31 |6

C13-MT.31 |6



C12-AT.1A

2倍大模型歯 [C12-AT.1A]

2倍に拡大し、歯根2/3程度まで形成された模型歯です。

□部位 32歯

バリエーション／標準価格

●単品



|4

|6

|6



B10-330

2.5倍大複製根模型歯 [B10-330]

天然歯を複製し2.5倍大に拡大した模型歯です。

□部位 32歯

バリエーション／標準価格


●単品



|6

|4

|6

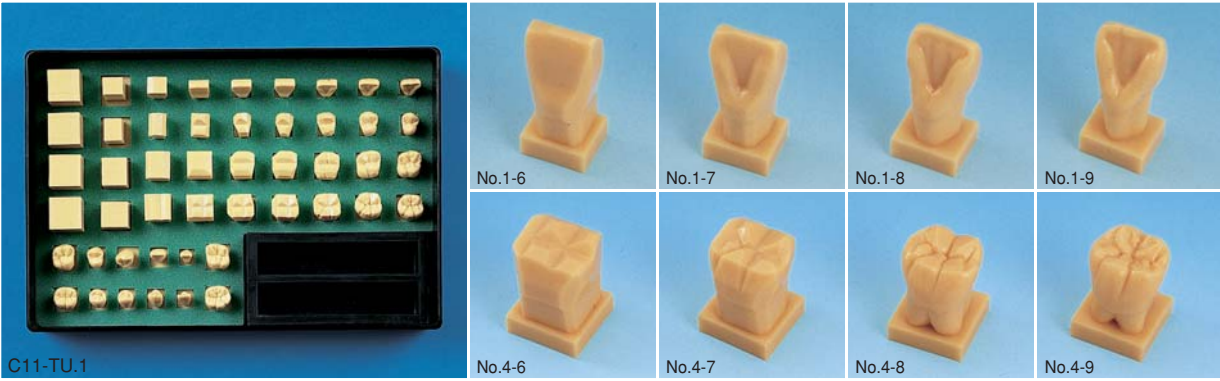

C11-TU.1

歯型彫刻ステップモデル [C11-TU.1]

1.5倍大の歯型彫刻ステップモデル。641 | 6 | の4部位を完成までの9ステップ別に再現しています。また、他の右側10部位と左側2部位の完成したモデルと石こうカービング用ゴム枠がセットされています。

セット内容

●4部位 9ステップモデル

6 4 1 | 6

●完成歯 右側10部位

7 432 | 6


左側2部位 7 54321 | 6

●石こう棒用ゴム枠H 27

サイズ 20×20×100mm／2本取り

バリエーション／標準価格

●単品

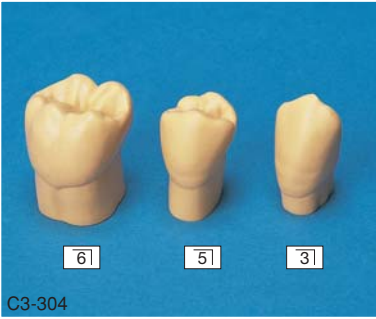

C3-304

4倍大レジン製模型歯


[C3-304]

4倍大に拡大した歯型彫刻標本用モデルです。

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●右側 14歯セット
●左側 14歯セット

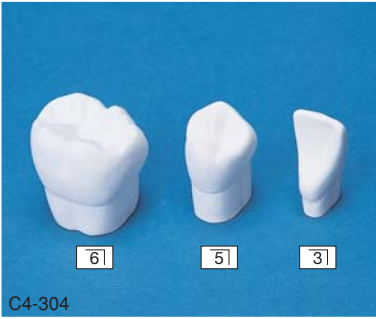

C4-304

4倍大石こう製模型歯

[C4-304]

304模型歯と形態の同じ石こう製模型歯です。

□部位 28歯

バリエーション／標準価格

●右側 14歯セット
●左側 14歯セット



H4-304


4倍大石こう模型歯用陰型

[H4-304]

304模型歯と形態の同じ石こう用ゴム枠です。

□部位 28歯

model 乳歯モデル

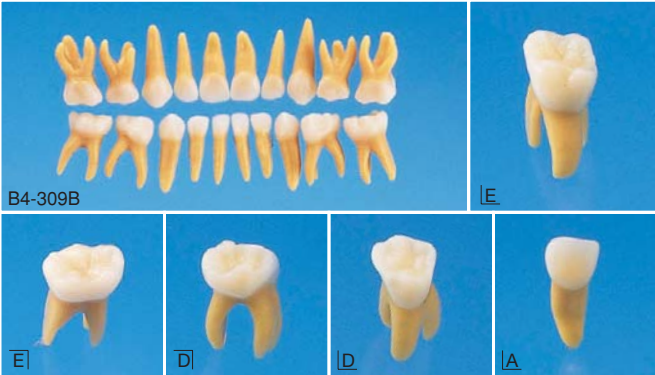


複製根乳歯模型歯 [B4-309B]

□部位 20歯

バリエーション／標準価格

•単品

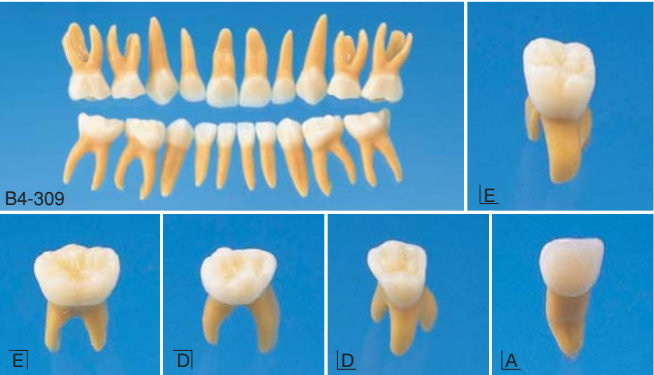

複製根乳歯模型歯 [B4-309]

□部位 20歯

バリエーション／標準価格

•単品



2倍大乳歯模型歯 [C7P-MA.K.5-各種]

カービングの見本用として、歯根部1/3程度まで根形成が施された2倍大の白色石こう製乳歯モデルです。

□部位 4部位


D C7P-MA.K.5 No.5-6

E C7P-MA.K.5 No.6-6

D C7P-MA.K.5 No.4-6

E C7P-MA.K.5 No.3-6

model カービング用モデル

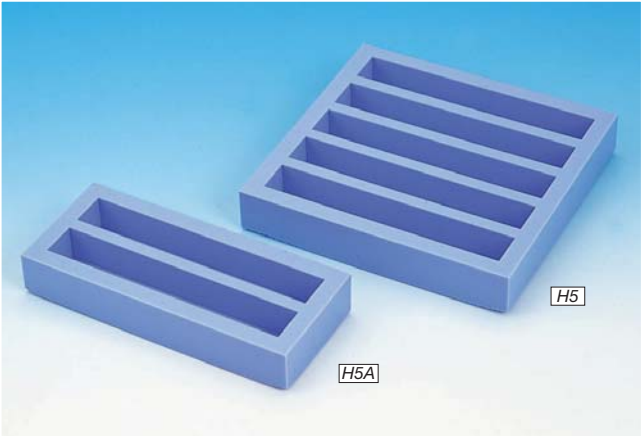


石こうカービング用ゴム枠 [H5] (5本取り)

15×15×100mmのサイズの石こう棒を5本同時に製作できるゴム枠。同じサイズの石こう棒が2本製作できるタイプもあります。

バリエーション／標準価格

•2本取り H5A

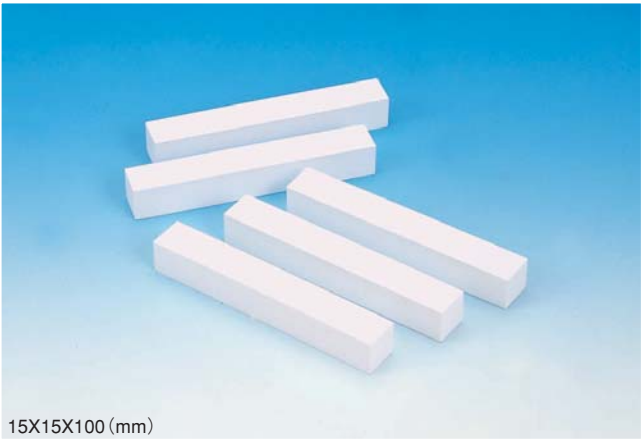


石こう棒 各種

白色普通石こう製のカービング用ブロックです。サイズの異なる6種類の中から選びいただけます。

バリエーション／標準価格

- 15X15X100mm (5本組)
- 20X20X100mm (5本組)
- 25X25X110mm (5本組)
- 40X40X60mm (1本組)
- 45X45X60mm (1本組)
- 45X45X70mm (1本組)

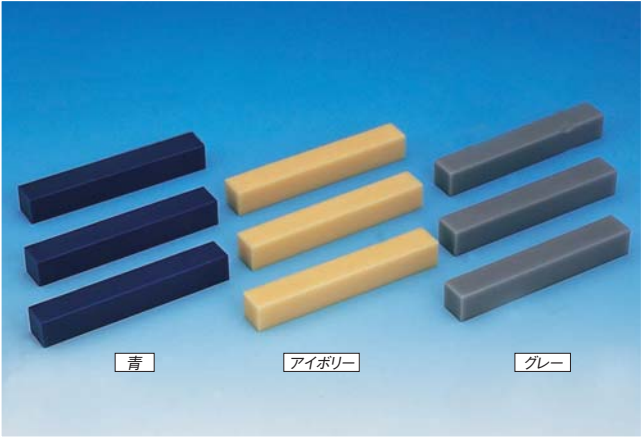


ワックスブロック [15X15X100mm] (5本組 各色)

15X15X100mmサイズのワックス製カービング用ブロック。色の異なる3色の中から選びいただけます。

バリエーション／標準価格

- 青色 5本組 15X15X100mm B
- アイボリー色 5本組 15X15X100mm I
- グレー色 5本組 15X15X100mm G

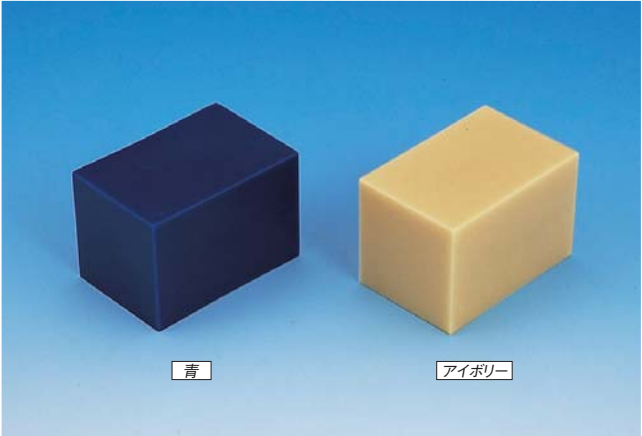

ワックスブロック [40X40X60mm] (各色)

40X40X60mmサイズのワックス製カービング用ブロック。色の異なる2色の中から選びいただけます。

バリエーション／標準価格

- 青色 40X40X60mm B
- アイボリー色 40X40X60mm I

Skull

頭蓋骨モデル




頭蓋骨模型 [P10-SB.12]

10分解可能な頭蓋骨モデル。頭蓋冠、下顎骨は着脱可能です。また前頭骨、側頭骨、正中鋤骨、下顎骨部分は開閉が可能のため内部の観察が可能です。



頭蓋骨模型 [P10-SB.1]

複製根模型歯B3-SB.1が装着され、3分割可能な頭蓋骨モデル。頭骨を取りはずして、頭蓋底の観察ができ、また下顎骨も取りはずすことができます。

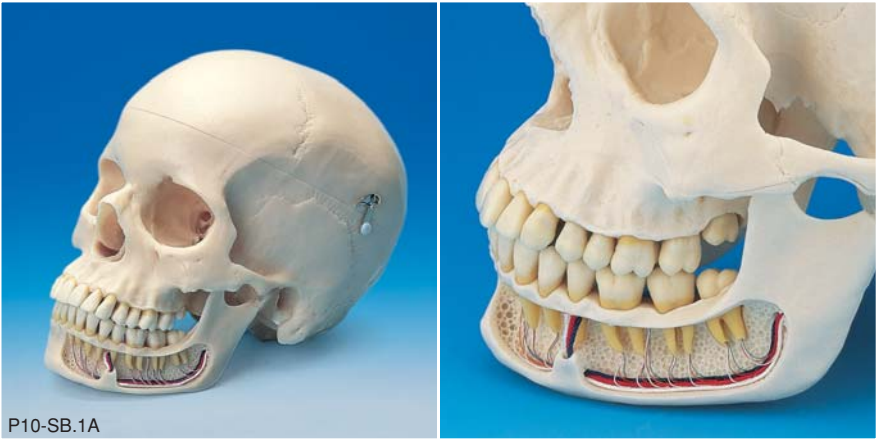

頭蓋骨模型 [P10-SB.1A]

P10-SB.1の下顎骨左側を開放した3分割可能な頭蓋骨モデル。下顎骨左側開放部から内部の歯根、神経線、下顎組織などを観察することができます。

商品番号索引	
004-F-GSF	65
206H.1-F-GSF, GSE, GSD	58
500A-F-GUB, GSF, GSE, GSD	24
500E-F-GUB, GSF, GSE, GSD	44
500H-F-GUB	54, 59
500H-F-GSF, GSE, GSD	54, 59
901C-F-GSF	66
A10シリーズ	24
A12A-500	22, 48
A13A-500	54, 58
A1A-SW.K.10	82
A2-各種	83
A20-310	83
A20-500	29
A20A-500	22, 31, 42
A22-500	29
A2-280	82
A22A-500	22, 48
A2-447	82
A2-448	82
A24A-204	82
A24Aシリーズ	48
A26Aシリーズ	24, 43
A26シリーズ	29
A2A-177	60
A2A-178	60
A2A-233	57
A2A-343	82
A2A-528	82
A2A-529	82
A2AN-各種	83
A2AN-530	83
A2AN-531	83
A2AN-532	83
A2AN-533	83
A2A-X.770	62
A2Aシリーズ	24, 58
A2TA-305	54, 58
A2TA-378	58
A2TA-390	54
A2TA-391	54
A3-310	82
A3A-310	82, 83
A50ANシリーズ	29
A50Aシリーズ	22, 43, 54, 58
A50シリーズ	29
A5-500	29
A55A-139B	42
A55A-149B	42
A55A-239D	42
A55ANシリーズ	29
A55Aシリーズ	22, 43, 54, 58
A5A-500	22, 31, 42, 54, 57
A5SA-500	24, 42
A5SAN-500	29
A70Aシリーズ	60
A7Aシリーズ	60
A8-407H	84
A8-SW.K.12	82

商品番号索引	
B10-330	89
B12シリーズ	49
B1A-004	62, 65
B1A-901C	66
B1A-DOT.2 No.1	60
B1A-DOT.2 No.2	60
B20-500	25, 44
B22Xシリーズ	49
B2-306	88
B2-TA.2	88
B3-305	88
B3-SB.1	88
B4-309	82
B4-309B	90
B8-320C	74
B9-500	74
C11-TU.1	89
C12-AT.1A	89
C13-AT.31	88
C3-304	89
C4-304	89
C7P-MA.K.5-各種	90
D1-0各種	75
D16-500A(GSD)	21
D16-500A(GSF)	21
D16-500E(GSD)	41
D16-500E(GSE)	41
D16-500E(GSF)	41
D16-500H(GSD)	53
D16-500H(GSE)	53
D16-500H(GSF)	53
D16D-500A(GSE)	21
D18-500A	21
D18-500E	41, 48
D50-JC.22	49
D51-500A	22
D51-500E	42, 48
D5-407C	83
D7-407H	84
D75-SW.K.14	81
DN3-各種	74
DOT.2-F-GSE	61
E-50各種	27
E1-各種	27
E3-各種	27
E7-No.6	32
G10-402K	35
G10-402K	35
G10D-402K	35
G10-KGP.6	35
G1-402	36
G1-402F	37
G1-405	37
G2-402	36
G2-405	37
H1-各種	27
H12-各種	76
H12-B	85
H1-500Aシリーズ	25, 45, 50

商品番号索引	
H3-402	36
H4-304	89
H5	91
H1S-0各種	75
i2D-400C	69
i3-400D	84
NAシリーズ	35
NCシリーズ	35
ND-N8	37
NP-1	49
P10-SB.1	92
P10-SB.12	92
P10-SB.1A	92
P10-SB.20	38
P12P-0各種	75
P15-004	65
P15-206H.1(GSD)	56
P15-206H.1(GSE)	56
P15-206H.1(GSF)	56
P15-206H.2(GSD)	57
P15-206H.2(GSE)	57
P15-206H.2(GSF)	57
P15-901C	66
P15-DOT.2	60
P15-00P.1	50, 73
P15-X.770	62
P3B-704	76
P3B-705	70, 85
P3D-801	68
P6-00P.4	72
P9-FP.13A	31
P9-FP.13B	31
P9-FP.15	31
P9-X.761	32
P9-X.825	33
P9-X.827	33
S1(染色あり)シリーズ	47
S12-500	47
S12A-500	48
S2(染色なし)シリーズ	47
S3シリーズ	47
S4シリーズ	47
S6シリーズ	47
S7シリーズ	47
S8シリーズ	47
SW.K.14-F-GSF	83
T1-PP	44
T1-PP(プリントあり)	24
T2-CM	78
T6-OPE.ST.1	67, 72
X770-F-GSE	63
X線ファントム	77
Z-1	24, 44, 55, 61, 67
歯石セット	55, 59, 61, 63, 67
シンプルマネキンⅡ	16
ニッシム Type1	14
ニッシム Type2	12
保存用ゴム枠	25, 45, 50
ワックスブロック	91

商品番号索引	
人エブラーク	55, 59, 61, 63, 69, 85
人工歯石	55, 59, 61, 63, 67
石こう棒 各種	91

- 価格は、2006年10月1日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 実習の分野は株式会社ニッシンが独自に分類致しました。実際の分野とは異なる事があります。
- カタログに記載の商品などの色調は、印刷のため実物とは異なります。
- カタログに記載の実習風景はイメージです。実際の実習とは異なります。また、一部商品を分かりやすく説明するためのカットモデルなどを用いています。
- ご使用に際しましては、取扱説明書及び注意事項などをお読みください。



www.nissin-dental.co.jp

 **0120-571939** (平日 10:00 ~ 17:00)

e-mail : info@nissin-dental.co.jp

■代表・亀岡工場

〒621-0001 京都府亀岡市旭町宮林22-1
TEL 0771-22-5534 FAX 0771-22-4926

■東日本営業所

〒110-0005 東京都台東区上野3-13-8
TEL 03-3836-3691 FAX 03-3833-3570

■西日本営業所

〒601-8469 京都市南区唐橋平坦町8
TEL 075-681-5719 FAX 075-681-5740

